


PMD Beauty Clean Acne

PMD Clean Acne er en smart ansiktsrenseenhet som bruker SonicGlow™-teknologi for å sikre en dyp, daglig rens. Clean Acne fjerner urenheter i huden ved å bryte ned skitt og olje fra innsiden av porene, mens den strammer opp og glatter ut huden. Videre bruker Clean Acne blålysterapi for å drepe bakterier som forårsaker akne, og gir deg en ren og strålende hud. Passer alle hudtyper. Denne skånsomme silikonbørsten er hygienisk, antibakteriell, vannfast og – best av alt – trenger aldri byttes ut.



Fordeler

- ✓ Fjerner sminke og urenheter fra huden
- ✓ Behandler mild til moderat akne
- ✓ Minimerer forekomsten av hudormer
- ✓ Reduserer opphoping av olje
- ✓ Løfter, strammer og jevner ut huden

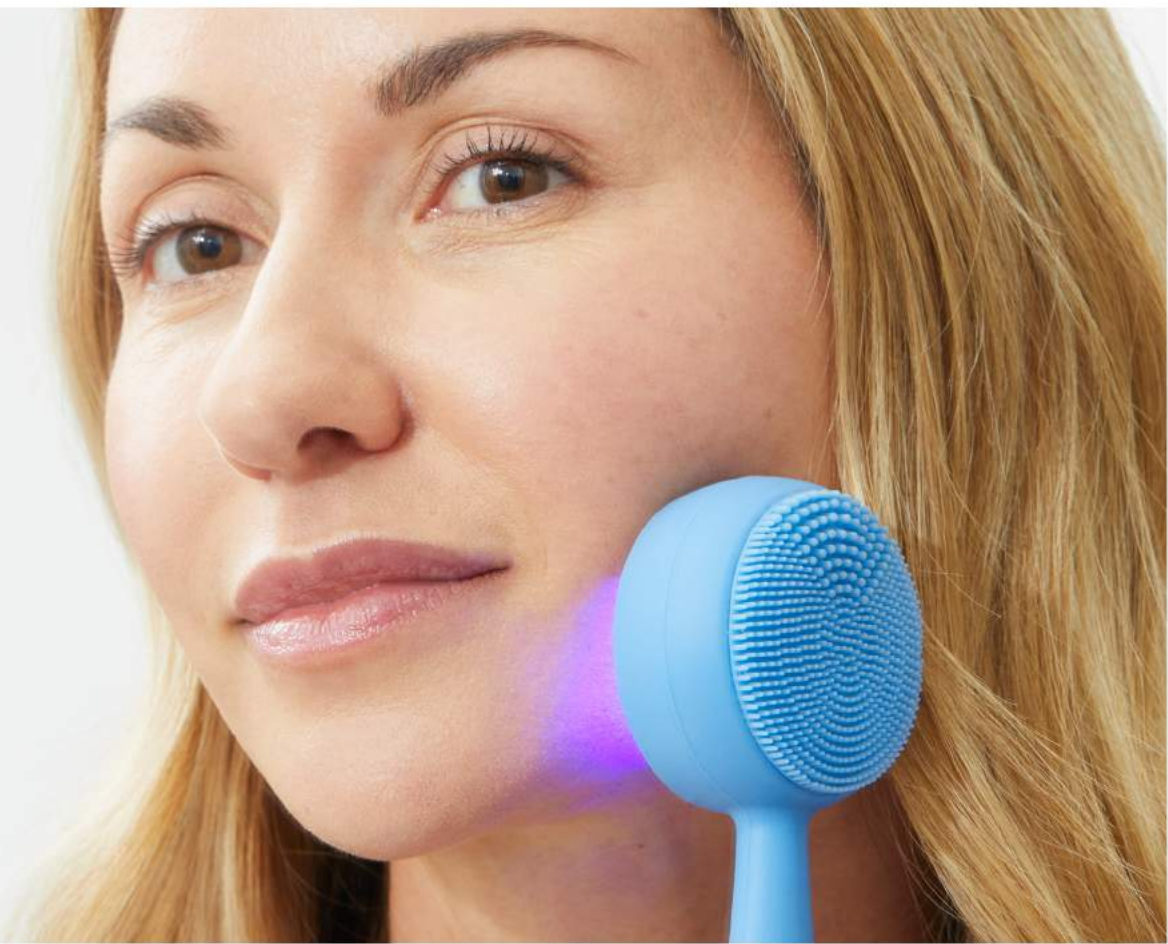

Teknisk informasjon

SonicGlow™-teknologi:
7000 vibrasjoner i minuttet

Oppladbar,
USB-ladekabel er inkludert

Vannfast, kan brukes i dusjen

2 rensemodus

3-minutters blålysterapi (Blue Light Therapy Spot Treatment): kraftig LED-lys av medisinsk kvalitet, som brukes spesielt i behandling av mild til moderat akne

2 års garanti

Inkluderer beskyttelsesbriller

Inkluderer et oppbevaringsetui

Bruk



1: Skyll ansiktet i varmt vann og gni rensen skånsomt inn i huden.



2: Skyll PMD Clean Acne under vann og slå den på.



3: Bruk den i modus 1 eller 2 for best renseresultat.



4: Beveg børstehodet i sirkulære bevegelser, og rens hele ansiktet. Det er trygt å bruke mer tid på områder som kan være mer utsatt for urenheter.



5: Skyll ansikt og PMD Clean Acne for overflødig renseprodukt, og tørk.



6: Slå på blålysterapi og bruk på områder med mild til moderat akne. PMD Clean Acne vil vibrere for å markere begynnelsen på 3-minutters behandling. Gjenta ved behov.

Bruk kun som anvist. Om du ikke følger anvisningene kan det føre til utslett, rødhet eller til og med skade. Avslutt bruken og kontakt en medisinsk fagperson dersom dette oppstår. Bruk beskyttelsesbriller, og unngå se direkte på LED-lyset under bruk. Produktet er kun ment for utvortes bruk. Unngå sensitive områder, inkludert områder med skadet, irritert eller kløende hud. Oppbevares utilgjengelig for barn. PMD er ikke ansvarlig for funksjonsfeil eller skade dersom produktet ikke blir brukt som tiltenkt. Ikke ment for klinisk eller kommersiell bruk. Avslutt bruken av produktet dersom du føler ubehag eller rødhet i huden, som vedvarer mer enn to dager etter bruk. Ta kontakt med kundeservice dersom du er lyssensitiv eller det oppstår andre forhold etter bruk. Effektene av PMD Clean vises ikke alltid med det samme, og resultatene kan variere.