


PMD Beauty Clean Acne

PMD Clean Acne är en smart ansiktsrengöringsenhet som använder SonicGlow™-teknik för att säkerställa en djup, daglig rengöring. Clean Acne avlägsnar orenheter genom att bryta ner smuts och olja inuti porerna, samtidigt som den stramar upp och slätar ut huden. Clean Acne använder även blå ljusterapi för att döda bakterier som orsakar akne och efterlämnar en klar och strålande hy. Passar alla hudtyper. Den skonsamma silikonborsten är hygienisk, antibakteriell, vattentät och – bäst av allt – behöver aldrig bytas.



Fördelar

- ✓ Avlägsnar makeup och orenheter från huden
- ✓ Behandlar mild till måttlig akne
- ✓ Minimerar uppkomsten pormaskar
- ✓ Reducerar fethet
- ✓ Lyfter, stramar upp och tonar huden

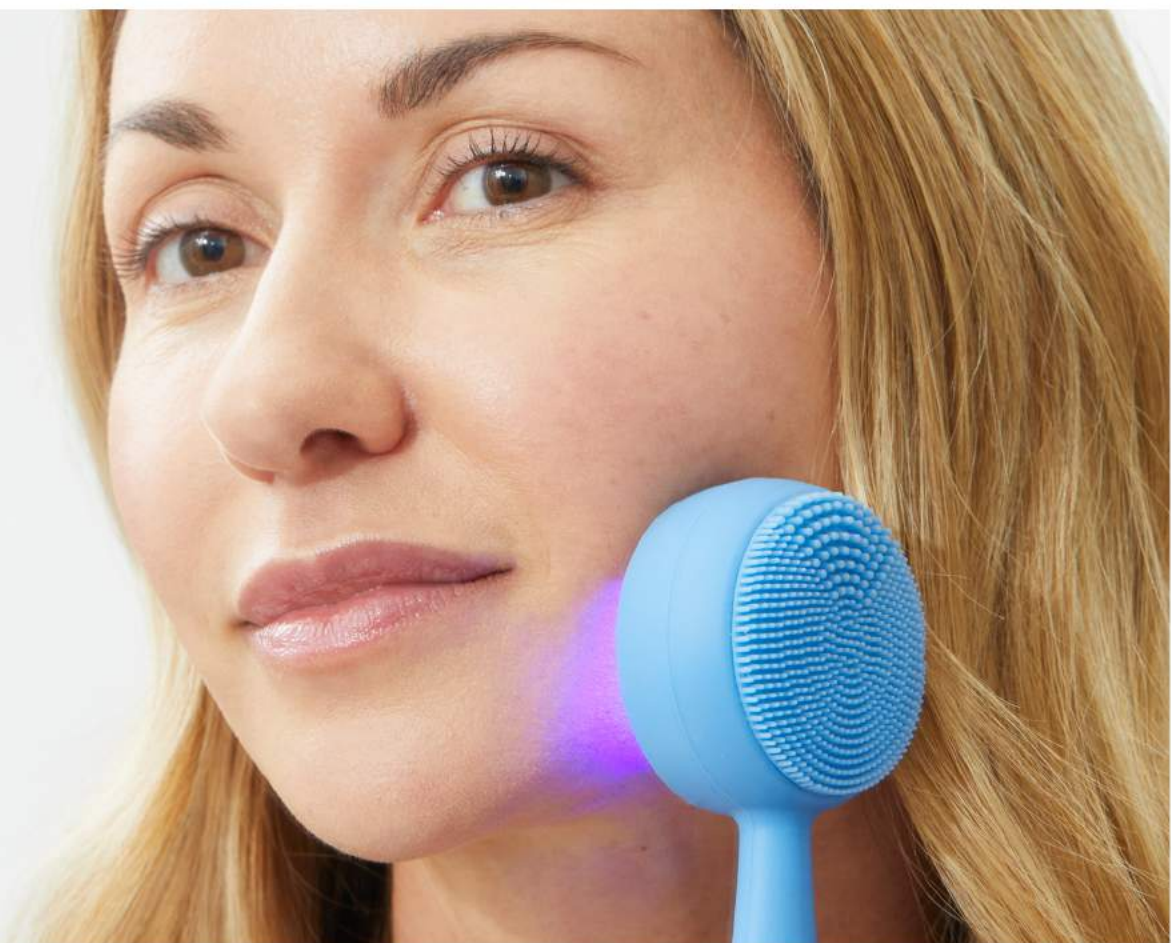

Teknisk information

SonicGlow™-teknik:
7 000 vibrationer per minut

Laddningsbar,
USB-laddningssladd
ingår

Vattentät, kan
användas i
duschen

2 rengöringslägen

3-minuters Blue Light
Therapy Spot Treatment:
kraftfull LED av medicinsk
klass som används särskilt
för att behandla mild till
måttlig akne

2 års
garanti

Inbegriper
skyddsglasögon

Inbegriper
ett fodral
för förvaring

Användning



1: Skölj ansiktet med varmt vatten och fördela försiktigt rengöring.



2: Skölj PMD Clean Acne under vatten och starta den.



3: Använd läge 1 eller 2 för bästa rengöringsresultat.



4: Förflytta borsthuvudet i cirklande rörelser och rengör hela ansiktet. Det är säkert att fokusera mer tid på problemområden.



5: Skölj bort överflödig rengöring från ansiktet och PMD Clean Acne och badda torrt.



6: Starta behandlingsläget med blått ljus och tillämpa på områden med mild till måttlig akne. PMD Clean Acne vibrerar för att markera start av 3-minutersprogrammet för aknebehandling. Upprepa efter behov.

Använd enligt instruktionerna. Att inte följa anvisningarna kan leda till hudutslag, rodnad eller till och med skada. Om detta inträffar, avbryt användningen och konsultera en läkare. Använd skyddsglasögon och titta inte direkt in i LED-lampan när du använder den. Produkten är enbart avsedd för utvärtes bruk. Undvik känsliga områden, vilka inbegriper områden med trasig eller irriterad hud eller kliande hud. Förvara utom räckhåll för barn. PMD ansvarar inte för felfunktion eller skada om produkten inte används enligt avsedd användning. Ej avsedd för klinisk eller kommersiell användning. Om du känner obehag eller rodnad i huden efter användning som kvarstår i mer än två dagar ska du sluta använda den här apparaten. Om du är känslig för ljus eller har andra besvär efter användning, kontakta kundtjänst. Effekterna av PMD Clean är inte alltid omedelbart synliga och resultaten kan variera.