


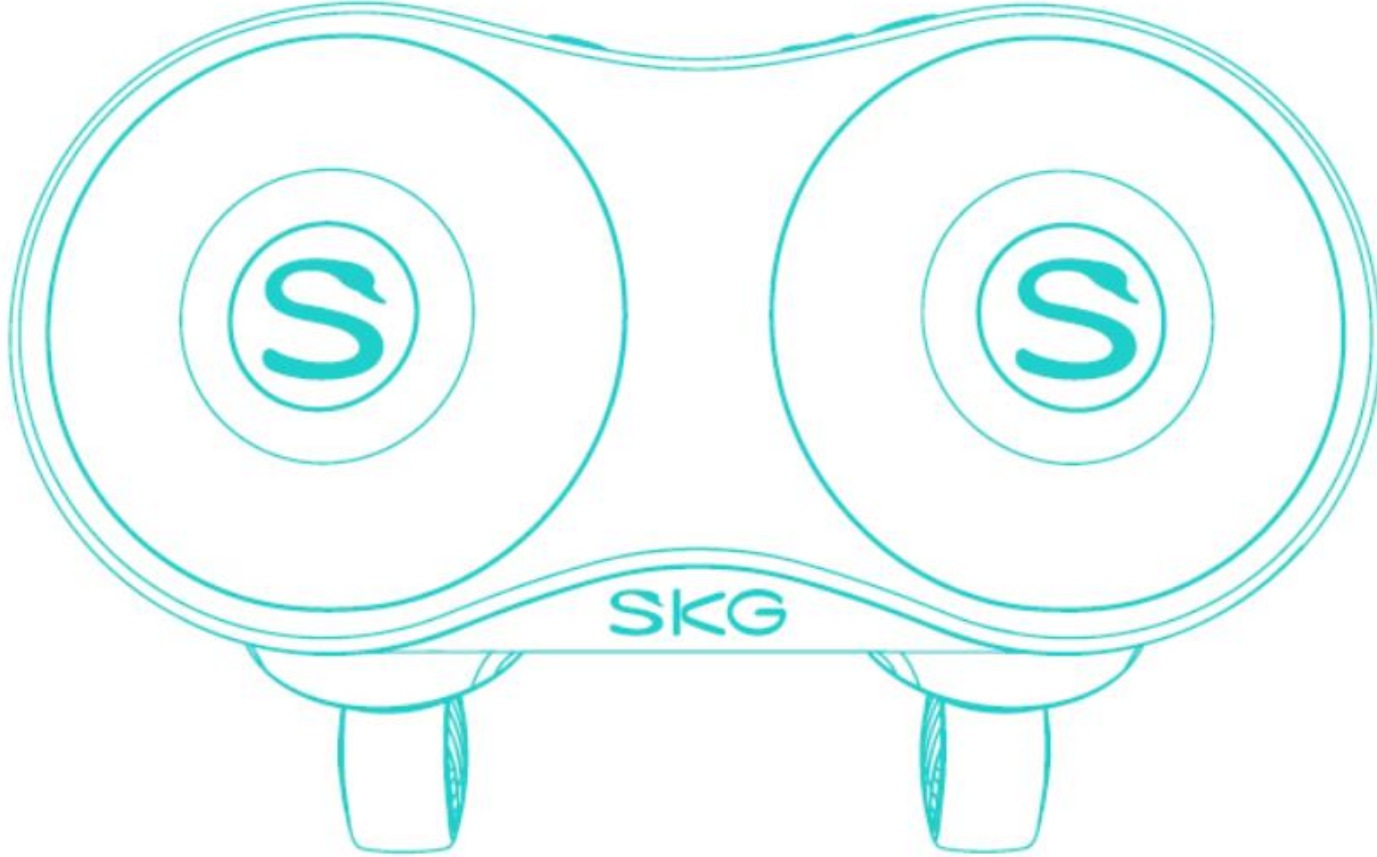

KULLANIM KILAVUZU

* Bu kılavuzda yer alan resimler ve şemalar yalnızca gösterim amaçlıdır. Gerçek görünüm farklılık gösterebilir.

Talimatlara <https://www.skg.com> adresinden ulaşabilirsiniz.

Güç düğmesi/Mod Değiştirme düğmesi

Bu düğmeye 1,5 sn. basılı tutulduktan sonra cihaz açılır/kapanır. Bu düğmeye (güç açık durumdayken) basıldıktan sonra masaj modu değişir


Masaj Gücü düğmesi

Bu düğmeye basıldıktan sonra masaj gücü kapanır

Şarj bağlantı noktası

Kızılötesi ışık

Metal masaj başlığı

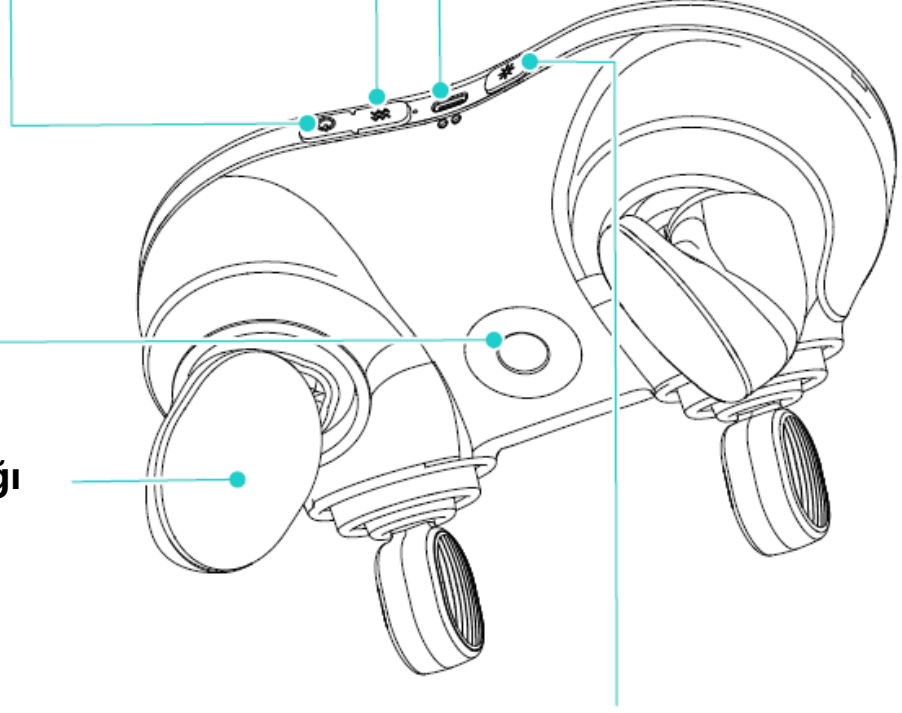

* "Sıcak Kompres" düğmesine 5 sn. bastıktan sonra Sesli Moda/Sessiz Moda geçin.

* Her kişinin farklı cilt gücü ve adaptasyonu nedeniyle cilt rahatsızlığını önlemek için lütfen işlev seçimine dikkat edin.

Sıcak Kompres düğmesi

Sıcak Kompres Modunu Değiştir/Kapat


Şarj/güç kaynağının açıklaması

Gösterge ışığının rengi	Gösterge ışığının durumu	Açıklama
Mavi	Her zaman açık	Pil gücü > %25
Turuncu	Her zaman açık	Pil gücü < %25

Turuncu	Yavaşça yanıp sönüyor	Pil şarj oluyor
Mavi	Yavaşça yanıp sönüyor	Pil tamamen şarj olmuş
Turuncu	Yanıp sönüyor	Kullanım istisnası var, lütfen gücü kapatıp yeniden başlattıktan sonra tekrar kullanın

Takma yöntemi

TR

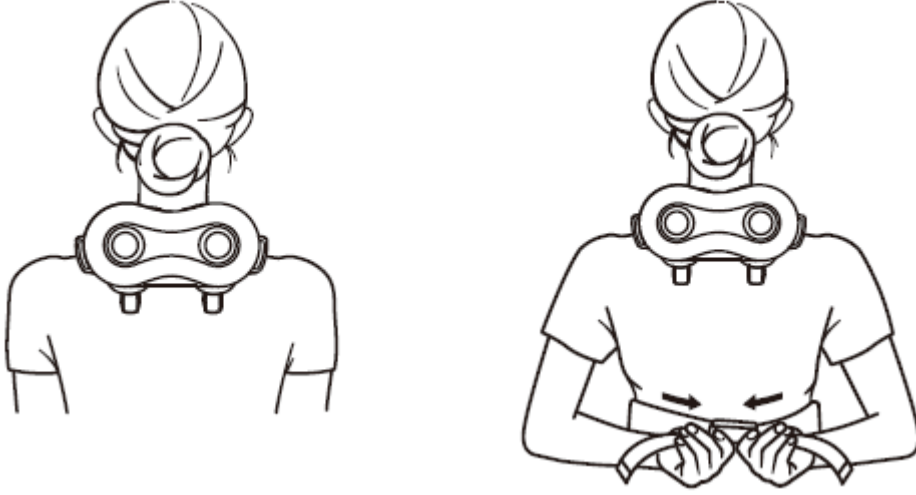

1. Cihazı boynunuza ve omuzlarınıza yerleştirin.
2. Fişi arkaya doğru çekin ve takın (kayışın her iki tarafının uzunluğu toka ile ayarlanabilir, lütfen kayışın her iki tarafının uzunluklarının tutarlı olduğundan emin olun ve kayışın rahatsızlığa neden olacak kadar sıkı olmamasına dikkat edin).



Çıkarma yöntemi:

1. Kullandıktan sonra omuz askılarını tokaya basarak çözün.
2. Arka tokayı gevşetin.
3. Düşmesini önlemek için ürünü omuzlardan dikkatlice çıkarın.

Ürün adı	Boyun ve Omuz Masaj Aleti
Cihaz adı	H7 Max
Pil kapasitesi	2500 mAh/18,5 Wh
Nominal giriş gücü	10 W
Nominal giriş voltajı	5 V _{DC}

Sorun Giderme Talimatları

Ürün düzgün çalışmıyorsa lütfen aşağıdaki koşulları kontrol edin. Önerilerimiz sorunu çözmezse lütfen ürünü onarım için bayiye gönderin.

Koşul	Olası Neden	Çözüm
Başlatılamıyor	Düşük pil gücü	Ürünü şarj edin
	Ürün açılmıyor	Açmak için güç düğmesine uzun basın
	Ürün hâlâ evdeki elektrik prizine bağlı	Şarj kablosunu cihazdan çıkarın
Şarj edilemiyor veya şarj ışığı yanmıyor	Şarj kablosu elektrik prizine düzgün takılmıyor	Şarj kablosunu prize yeniden takın
	Yanlış şarj kablosu kullanılıyor	Type-C konektörlü bir kablo kullanın

Lütfen şarj edilebilir pilin (lityum-iyon pil) geri dönüşümünü destekleyin.

 Tehlike	Bu ürünlerdeki pil, diğer ürünler için tasarlanmamış özel bir şarj edilebilir pildir. Lütfen çıkarılan şarj edilebilir pili şarj etmeyin. · Ateşe atmayın veya yüksek sıcaklıklara ulaşana kadar ısıtmayın. · Çivi ile delmeyin, yere çarpmayın veya modifikasyon için parçalarına ayırmayın. · Pilin artı ve eksi kutuplarını doğrudan metale bağlamayın. · Kolyeler, saç tokaları vb. ile birlikte saklamayın. · Yüksek sıcaklıktaki yerlerde veya yakıcı güneş altında şarj etmeyin, kullanmayın veya bırakmayın. · Yukarıdaki durumlar ısınmaya, yangına ve bozulmaya neden olabilir.
 Uyarı	Yanlışlıkla yutulması ihtimaline karşı, çıkarılan şarj edilebilir pili bebeklerin ve küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. · Cihaz yanlışlıkla yutulduğunda lütfen derhâl bir doktora başvurun. · Pil sıvısı aktığında sıvıya elle dokunmayın ve aşağıdaki yöntemleri uygulayın. · Pil elektroliti gözünüze girdiğinde körlük ihtimaline karşı elinizle gözlerinizi ovuşturmayın. Gözlerinizi derhâl temiz suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın. Vücudunuz veya giysileriniz pil elektroliti nedeniyle kirlendiğinde ciltte tahrişe veya yaralanmaya neden olabilir. Lütfen su ile durulayın. Hâlâ rahatsızlık hissediyorsanız derhâl tıbbi yardım alın. · Sadece atılacak ürünler ayrıştırılabilir. Aksi takdirde yangın, elektrik çarpması, yaralanma gibi kazalar meydana gelebilir. Pili onarmanız gerektiğinde (pili değiştirmek için değil) lütfen bu ürünü satın aldığınız bayiye danışın.

Bu ürünlerdeki lityum-iyon pil değiştirilmesine izin verilmeyen geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir değerli bir kaynaktır. Lütfen bu ürün imha edileceği zaman şarj edilebilir pilleri geri dönüştürebilecek profesyonel bir kuruma teslim edin. Bu ürünü imha etmeden önce pili bu cihazdan çıkarın. Pili çıkarmadan önce cihazın gücü kapatılmalıdır. Pil aşağıdaki adımlar izlenerek güvenli bir şekilde imha edilmelidir:

1. Profesyonel aletlerle üst ve alt kapakları açın.
2. Devre kartını ve motoru çıkarın.
3. Pili çıkarın, pil kablolarını profesyonel pense ile kesin ve ardından pili çıkarın.

Pilin çıkarılması için izlenecek adımlar:

1. Gövdeyi aletlerle açın;
2. Devre kartı üzerindeki vidaları gevşetin;
3. Pil kablosunu makasla kesin;
4. Pili çıkarın;

Onlemler

TR

⚠ Kullanım Kısıtlamaları ve Konumlar

- Parazit ve olası zararlardan kaçınmak için lütfen bu ürünü aşağıdaki tıbbi elektronik cihazlarla birlikte kullanmayın:
 - Kalp pili gibi vücuttaki tıbbi elektronik cihazlar
 - Yapay kalp-akciğer makineleri gibi yaşamı idame ettiren tıbbi elektronik cihazlar
 - Elektrokardiyograflar gibi tıbbi elektronik cihazlar
- Benzin istasyonları, yüksek tozlu atölyeler veya gaz istasyonları gibi yanıcı veya patlayıcı ortamlarda kullanmayın.
- Bu ürün tıbbi bir cihaz değildir ve boyun hastalıklarını teşhis veya tedavi etme işlevine sahip değildir. Boyun rahatsızlığı olan hastalar tedaviyi geciktirmemek için tıbbi personele başvurmalıdır.
- Kazalara neden olabileceğinden dolayı bu ürünü araç kullanırken, tırmanırken veya diğer tehlikeli faaliyetleri gerçekleştirirken kullanmayın.
- Aşırı masaj nedeniyle meydana gelebilecek düşük sıcaklıktaki yanıkları ve rahatsızlık riskini önlemek için ürünün bir seferde en fazla 20 dakika (2 döngü) kullanılması önerilir.
- Yüksek yoğunluklu ayarlardan kaynaklanacak rahatsızlık veya yaralanmaları önlemek için düşük bir hızla başlayın ve kişisel rahatlığa göre kademeli olarak daha yüksek bir ayara çıkın.
- Uyurken veya bilinç bozukluğu durumunda kullanmayın.
- Serebrovasküler hastalıklar veya diğer dolaşım bozuklukları, boyun bölgesinde iltihaplanma, şişme, cerahat veya servikal vertebra hastalıkları olan bireyler, semptomları şiddetlendirebileceğinden bu ürünü kullanmamalıdır.
- Ürünü bebeklerin, çocukların ve bilinci tamamen veya kısmen kapanmış kişilerin erişemeyeceği yerlerde saklayın. Kazaları önlemek adına bu kişilerin ürünü kullanmalarına izin vermeyin.
- Yetmiş yaşın üzerindeki kullanıcılar için dikkatli olunması tavsiye edilir (sadece doktor izni ve yönlendirmesi ile kullanmalıdırlar). Daha hassas cilt ve daha az hassas sinir uçları nedeniyle 65 yaşın üzerindeki kullanıcılarda lütfen daha düşük bir ayar kullanın ve kullanım süresini kesinlikle takip edin.

⚠ Uyarılar

Cihazın ısıtılmalı bir yüzeyi vardır. Isıya karşı hassas olmayan kişiler cihazı kullanırken dikkatli olmalıdır.

Bu cihaz değiştirilemeyen piller içerir.

- Bu ürün bir kişisel bakım masaj aletidir ve ilaçların veya tıbbi cihazların yerine kullanılamaz.

- Çocuklar veya hamile kadınlar tarafından kullanılamaz.
- Adet dönemindeki kadınlar fiziksel durumlarına göre dikkatli kullanmalıdır.
- Lityum pil içerir; yüksek sıcaklıktaki ortamlara koymayın.
- Hassas cilde, yüz dermatitine veya yüz implantlarına sahip bireyler tıbbi rehberlik altında kullanmalıdır.
- Metallere veya ısıya karşı cilt alerjisi olan kullanıcılar bu ürünü kullanırken dikkatli olmalıdır.
- Bu ürün ısıtma fonksiyonuna sahiptir; ısıya karşı hassas olmayan kullanıcılar, düşük ısı ayarını kullanmalı ve kullanım süresini sıkı bir şekilde kontrol etmelidir.
- Kullanım sırasında rahatsızlık olursa derhâl kullanmayı bırakın.
- Ürünü sökmeye çalışmayın.
- Pili kendiniz değiştirmeye çalışmayın.
- Servikal omurga yaralanması olan bireyler bu ürünü kullanmadan önce sağlık uzmanlarına danışmalıdır.
- Cihazın ısıtıcı bir yüzeyi vardır; ısıya karşı hassas olmayan kullanıcılar dikkatli olmalıdır.
- Normal bir ortamda kullanın: Sıcaklık: 0 °C-40 °C; Bağıl Nem: <%80 bağıl nem, yoğuşmasız; Atmosferik Basınç: 50 Kpa-106 Kpa.
- Normal taşıma ve saklama koşullarını seçin: Sıcaklık aralığı: -20 °C ila +55 °C; Bağıl Nem aralığı: <%95 bağıl nem, yoğuşmasız; Atmosferik Basınç: 50 Kpa-106 Kpa.
- Bu ürün bir lityum pil içerir; sökmeyin, değiştirmeyin, suya daldırmayın veya ateşe atmayın aksi takdirde hasar görebilir veya patlayabilir.
- Kazalara veya rahatsızlığa neden olabileceğinden, kullanım sırasında kalbe baskı uygulamayın.
- Mide bulantısı veya rahatsızlığa neden olabileceğinden, tıbbi cihazlarla veya bu üründen birden fazlasını aynı anda kullanmayın.
- Kazalara neden olabileceğinden, kullanım kılavuzunda belirtilen amaçlar dışında kullanmayın.
- Arızaya veya elektrik çarpmasına neden olabileceğinden, ürünü kendiniz sökmeyin, onarmayın veya değiştirmeyin.
- Optimum bir deneyim için ürünü zorla çekmeyin veya üzerine eğilmeyin!



Kaza veya rahatsızlık riski olabileceğinden, aşağıdaki durumlarda kullanmadan önce bir doktora danışın:

- Bulaşıcı hastalığı olanlar da dâhil olmak üzere hâlihazırda tıbbi tedavi gören veya kendini iyi hissetmeyen hastalar
- Kalp veya nörolojik anormallikleri olan hastalar
- Deride duyuusal bozuklukları veya anormallikleri olan hastalar
- Vücut ısı 38 santigrat dereceyi aşan (ateşli) hastalar
- Hâlihazırda ilaç kullanan hastalar
- Anormal kan basıncı olan hastalar
- Kendi iradesini ifade edemeyen hastalar
- Diyabet gibi rahatsızlıkların neden olduğu ciddi periferik dolaşım bozuklukları nedeniyle algılama bozukluğu yaşayan hastalar

Aşağıdaki durumlarda kullanmayın:

- Kötü huylu tümörü olan hastalar
- İnsan vücudunun kalp bölgesine yakın şekilde
- Metal implantları olan hastalar
- Hamileler veya doğum yapmış kadınlar
- Kalp pili kullananlar
- Akut süpüratif enflamasyonu olan hastalar
- Pıhtılaşma bozukluğu olan hastalar
- Kanama eğilimi olan hastalar
- Spastik felçli hastalar
- Ciddi bilişsel bozukluğu olan hastalar
- Serebrovasküler kazaları takiben spastik fazdaki hastalar
- Anormal nörojenik stres tepkileri olan bireyler
- Bilinci açık olmayan veya uzuv eklem kontraktür deformiteleri olan bireyler

Önlemler:

- Lütfen bu ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu iyice okuyun.
- Ürünle ilgili bir anormallik nedeniyle kendinizi iyi hissetmezseniz ürün derhâl kullanmayı bırakın. Vücudunuzda veya cildinizde olağandışı hisler fark ederseniz bir doktora danışın ve doktorun tavsiyelerine uyun.
- Çalışmayı engelleyen bir arıza durumunda, aşırı ısınma veya kısa devre riskini önlemek için derhâl güç bağlantısını kesin ve ürünü çıkarın. Yardım için müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
- Elektrik çarpmasına veya kazalara neden olabileceğinden, şarj kablosunu ıslak ellerle takıp çıkarmayın.
- Ürünü kullanırken kolye takmayın.
- Ürünü düz yatarken kullanmayın.
- Ürünü doğru şekilde takın, servikal omurga bölgesine yerleştirin ve kazaları veya rahatsızlığı önlemek için her iki tarafa simetrik şekilde takın.
- Şarj kablosunu üründen çıkarırken kabloyu çekmeyin; bunun yerine elektrik çarpmasını veya ürünün hasar görmesini önlemek için fişi tutarak çıkarın.
- Şarj kablosunu üründen çıkarırken kabloyu çekmeyin; bunun yerine elektrik çarpmasını veya ürünün hasar görmesini önlemek için fişi tutarak çıkarın.
- Ürünü ilk kez veya uzun süre kullanmadıktan sonra kullanıyorsanız düzgün çalıştığından emin olmak için pili talimatlara göre şarj edin.
- Uzun süreli çalışma sırasında ürünün yüzeyinin ısınması normaldir.
- Ürün boyun bölgesine uygun şekilde masaj yapacaktır; uzun süreler boyunca sürekli masaj yapmayın. Rahatsızlık oluştursa tekrar kullanmadan önce ara verin.

Öneriler:

- Kullanmadan önce ana ünite düğmelerinin düzgün çalıştığından emin olun.
- Sıkışma yaralanmalarını önlemek için parmaklarınızı veya vücudunuzun diğer kısımlarını cihazın dar kısımlarına sokmamaya dikkat edin.
- Bu ürünü atarken, çevre kirliliğini önlemek için lütfen yerel çevre koruma yönetmeliklerine uygun olarak atın.
- 16 yaş ve üzeri bireyler tarafından kullanılması önerilir.

Lütfen bu ürünü aşağıdaki yerlerde kullanmayın veya saklamayın:

- Doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerler.
- Yüksek sıcaklık ve neme sahip alanlar.
- Suyun bulunduğu yerler.
- Tozlu ortamlar.
- Açık alevlerin yakınında.
- Güçlü elektromanyetik alanlarda.
- Ürünün titreşimlere veya darbelere maruz kalabileceği yerler.

Dikkat:

- Vücut masaj aletini kullanırken cilt tahrişi yaşarsanız, lütfen aleti kullanmaktan kaçının ve belirtilerinizin hafifleyip hafiflemediğini görmek için iki ila üç gün bekleyin. Belirtiler devam ederse veya kötüleşirse lütfen bir doktora başvurun.
- Egzamanız, alerjiniz veya astımınız varsa masaj aletini kullanmaktan kaynaklı cilt tahrişi veya alerji yaşama olasılığınız daha yüksek olabilir.
- * Cihaz, yalnızca üzerindeki işarete karşılık gelen emniyetli ekstra düşük voltajda beslenmelidir.
- * Bu cihazı, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler; kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin nezaret edildiği veya talimatların verildiği ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanabilirler.
- * Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- * Yetişkin denetimi olmadan cihazın temizliği ve bakımı, çocuklar tarafından yapılmamalıdır.



Not: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, bir konut tesisatında zararlı parazitlere karşı makul bir koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa telsiz iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak belirli bir tesisatta parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu ekipman radyo veya televizyon yayınlarının alınmasında zararlı parazitlere neden oluyorsa ve bu durum ekipmanın açılıp kapatılmasıyla tespit edilebiliyorsa kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:

- * Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- * Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- * Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.
- * Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.



Bu cihaz, (AB)2023/988 sayılı Direktifin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygundur.

DİKKAT: PİL YANLIŞ BİR TÜRLE DEĞİŞTİRİLİRSE PATLAMA RİSKİ VARDIR.

KULLANILMIŞ PİLLERİ TALİMATLARA UYGUN OLARAK İMHA EDİN.

AB Uyumluluk Beyanı:


SKG Health technologies Co., Ltd. İşbu belgeyle bu cihazın (AB)2023/988 sayılı Direktifin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. AB Uygunluk Beyanının bir kopyası <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity> adresinde çevrim içi olarak mevcuttur.



Eski elektrikli aletler artık atıklarla birlikte imha edilmemeli, ayrı olarak imha edilmelidir. Özel kişiler aracılığıyla ortak toplama noktasında yapılan imha işlemi ücretsizdir. Eski cihazların sahibi, cihazları bu toplama noktalarına veya benzer toplama noktalarına götürmekle sorumludur. Bu küçük kişisel çabayla değerli hammaddelerin geri dönüştürülmesine ve toksik maddelerin arıtılmasına katkıda bulunmuş olursunuz.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

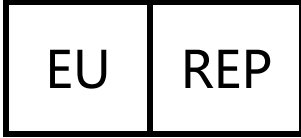

OST_EU_20230214000009

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

succeservice2@hotmail.com