


Dr Brown's™



Gripebelt™

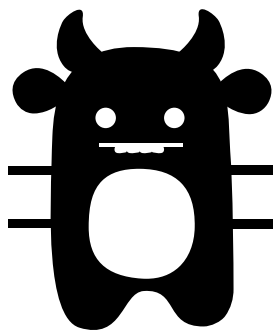


infant
Gripebelt™

EN Gripebelt™ with Teether

1

WARM


microwave the clay pack
for up to 10 seconds -
*see clay pack for
more instructions*

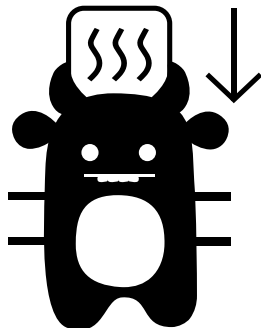

2

SWADDLE


secure adjustable band
(fit 2-3 fingers between belly and band)
to gently compress
the midsection

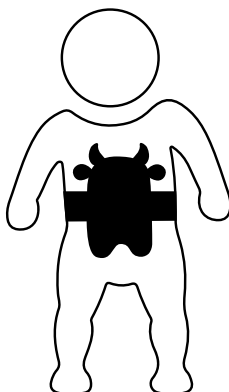

3

ENGAGE

distract with soft, plush
toy and silicone teether

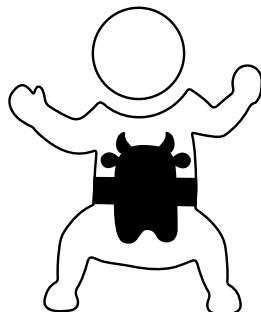

For cold therapy: cool pack in freezer for 1 hour and place inside the gripe belt. Apply for 20 minutes, or as doctor recommended. Remove and wait at least 20 minutes. Repeat as needed.

WARNING!

Product can cause burns if too hot. Remove immediately at any sign of irritation or distress. Do not leave on during sleep. Do not secure strap too tightly. Monitor during use.

100% Silicone Teether

Cleaning

Wipe clean prior to each use.

Instructions

Inspect carefully before each use. Throw away at the first sign of damage or weakness. Refrigerate for cooling comfort.

WARNING!

Do not tie teether around a child's neck, as it presents a strangulation danger. Never leave a child unattended while using this or any other infant product. Do not place in the freezer compartment.

Gripebelt™


Cleaning

Wipe clean. Hand wash only. Air dry. Inspect carefully before each use. Throw away at the first sign of damage or weakness.

1

WARM

microwave the clay pack
for up to 10 seconds -
*see clay pack for
more instructions*

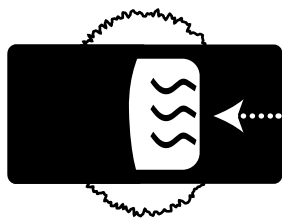

2


SWADDLE

secure adjustable band
(fit 2-3 fingers between belly and band)
to gently compress
the midsection

3

ENGAGE

distract with soft
black & white plush toy
to help stimulate
baby's vision

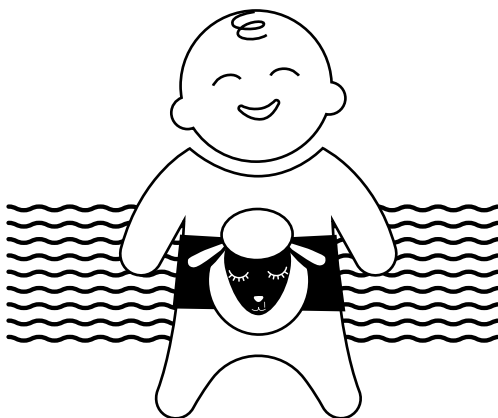

For cold therapy: cool pack in freezer for 1 hour and place inside the gripe belt. Apply for 20 minutes, or as doctor recommended. Remove and wait at least 20 minutes. Repeat as needed.

WARNING!

Product can cause burns if too hot. Remove immediately at any sign of irritation or distress.
Do not leave on during sleep. Do not secure strap too tightly. Monitor during use.

Cleaning


Wipe clean. Hand wash only. Air dry. Inspect carefully before each use.
Throw away at the first sign of damage or weakness.

FR Gripebelt™ avec Jouet de Dentition

1

RÉCHAUFFER


Chauffez le bloc à micro-ondes pendant 10 secondes maximum – voir le bloc pour plus d'instructions

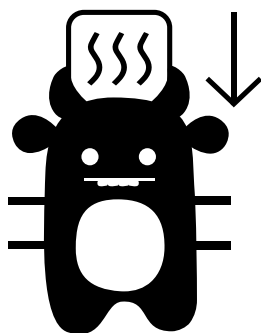

2

EMMAILLOTER


attachez la courroie ajustable (placez 2 ou 3 doigts entre le ventre et la courroie) afin de comprimer légèrement l'abdomen

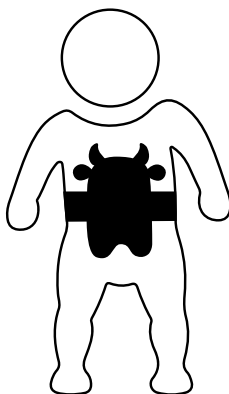

3

DISTRAIRE

distrayez le bébé avec une peluche et un jouet de dentition en silicone

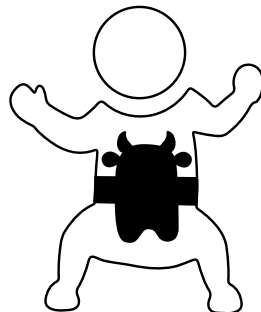

Pour la thérapie par le froid : Refroidissez le bloc au congélateur pendant au moins 1 heure, puis insérez-le dans la peluche. La compresse doit être appliquée pendant 20 minutes, ou suivant la recommandation du médecin. Retirez-la et attendez au moins 20 minutes. Répétez au besoin.

AVERTISSEMENT !

Ce produit peut causer des brûlures s'il est trop chaud. Retirez immédiatement le produit en cas de signe d'irritation ou de détresse. Ne laissez pas le produit en place pendant le sommeil. Ne serrez pas trop la courroie. Supervisez pendant l'usage.

100% Silicone Teether

Nettoyage

Essayez pour nettoyer avant chaque usage.

Instructions

Inspectez soigneusement le produit avant chaque usage. Jetez le produit dès qu'il montre tout signe de dommage ou de faiblesse. Réfrigérez pour une fraîcheur apaisante.

AVERTISSEMENT !

N'attachez pas le jouet de dentition autour du cou de l'enfant. Il risquerait de s'étouffer. Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance pendant l'utilisation de ce produit ou de tout autre produit pour bébé. Ne mettez pas ce produit au congélateur.

Gripebelt™

Nettoyage

Essayez pour nettoyer. Lavez le produit à la main seulement. Séchez à l'air. Inspectez soigneusement le produit avant chaque usage. Jetez le produit dès qu'il montre tout signe de dommage ou de faiblesse.

FR Gripebelt pour les nourrissons

1

RÉCHAUFFER

Chauffez le bloc à micro-ondes pendant 10 secondes maximum –
voir le bloc pour plus d'instructions

2



EMMAILLOTER

attachez la courroie ajustable
(placez 2 ou 3 doigts entre le ventre et la courroie)
afin de comprimer
légèrement l'abdomen

3

DISTRAIRE

distrayez bébé avec
le jouet noir et blanc
qui stimule sa vision

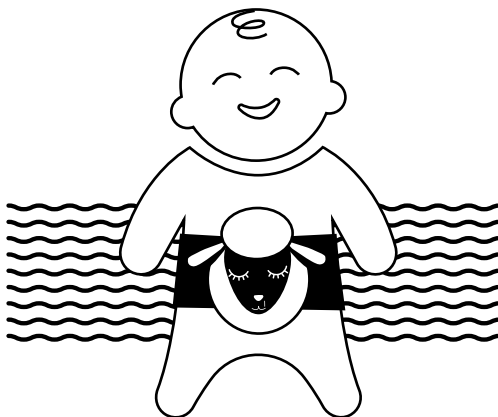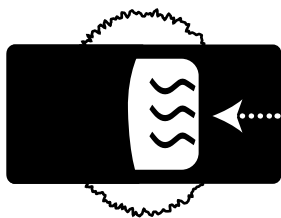

Pour la thérapie par le froid : Refroidissez le bloc au congélateur pendant au moins 1 heure, puis insérez-le dans la peluche. La compresse doit être appliquée pendant 20 minutes, ou suivant la recommandation du médecin. Retirez-la et attendez au moins 20 minutes. Répétez au besoin.

AVERTISSEMENT !

Ce produit peut causer des brûlures s'il est trop chaud. Retirez immédiatement le produit en cas de signe d'irritation ou de détresse. Ne laissez pas le produit en place pendant le sommeil. Ne serrez pas trop la courroie. Supervisez pendant l'usage.

Nettoyage


Essayez pour nettoyer. Lavez le produit à la main seulement. Séchez à l'air. Inspectez soigneusement le produit avant chaque usage. Jetez le produit dès qu'il montre tout signe de dommage ou de faiblesse.

ES Gripebelt™ con Mordedor

1

CALIENTE


ponga la compresa en el
microondas hasta por
10 segundos –
*vea más instrucciones
en la compresa*

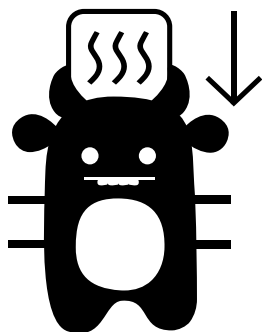

2

ENVUELVA


asegure la banda ajustable
*(inserte 2 o 3 dedos entre el
estómago y la banda)*
para ceñir suavemente
el abdomen

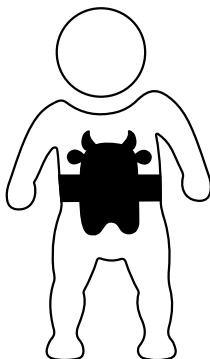

3

PARTICIPE

distraiga con el muñeco de
felpa suave y el mordedor
de silicona

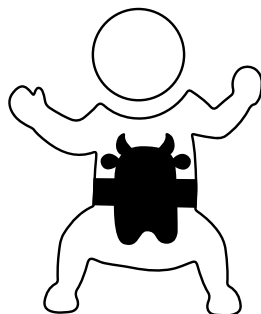

Para la terapia de frío: Enfríe la bolsa en el congelador durante por lo menos 1 hora y después, colóquela dentro del muñeco de felpa. Aplique durante 20 minutos, o según recomiende el médico. Retire y espere por lo menos 20 minutos. Repita según sea necesario.

¡ADVERTENCIA!

El producto puede causar quemaduras si está muy caliente. Quite inmediatamente si ve alguna señal de irritación o malestar. No lo deje puesto mientras el bebé duerme. No apriete mucho la correa. Vigile durante el uso.

Mordedor de 100% Silicona

Limpieza

Limpie con un paño antes de cada uso.

Instrucciones

Inspeccione con cuidado antes de cada uso. Deséchelo tan pronto lo vea dañado o frágil.
Refrigere para un alivio refrescante.

¡ADVERTENCIA!

No ate el mordedor alrededor del cuello del niño, porque existe riesgo de estrangulación. Nunca deje a un niño solo cuando esté usando este o cualquier otro producto infantil. No lo coloque en el compartimento de congelador.

Gripebelt™

Limpieza


Limpie con un paño. Lave a mano solamente. Seque al aire. Inspeccione con cuidado antes de cada uso. Deséchelo tan pronto lo vea dañado o frágil.

ES Gripebelt para bebés

1

CALIENTE

ponga la compresa en el
microondas hasta por
10 segundos –
*vea más instrucciones
en la compresa*

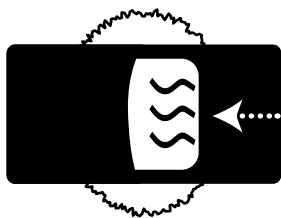

2


ENVUELVA

asegure la banda ajustable
*(inserte 2 o 3 dedos entre el
estómago y la banda)*
para ceñir suavemente
el abdomen

3

PARTICIPE

distraiga con el muñeco de
felpa suave blanco y negro
para ayudar a
estimular la visión del bebé

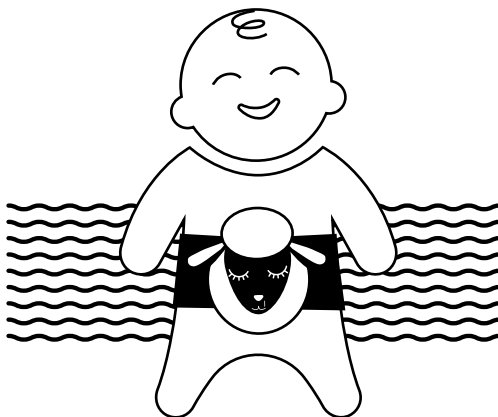

Para la terapia de frío: Enfríe la bolsa en el congelador durante por lo menos 1 hora y después, colóquela dentro del muñeco de felpa. Aplique durante 20 minutos, o según recomiende el médico. Retire y espere por lo menos 20 minutos. Repita según sea necesario.

¡ADVERTENCIA!

El producto puede causar quemaduras si está muy caliente. Quite inmediatamente si ve alguna señal de irritación o malestar. No lo deje puesto mientras el bebé duerme. No apriete mucho la correa. Vigile durante el uso.

Limpieza

Limpie con un paño. Lave a mano solamente. Seque al aire. Inspeccione con cuidado antes de cada uso. Deséchelo tan pronto lo vea dañado o frágil.