


DrBrown's™




Microwave Steam Sterilizer


INSTRUCTIONS

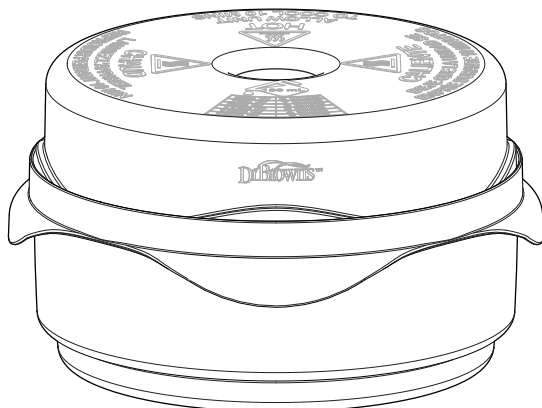


A

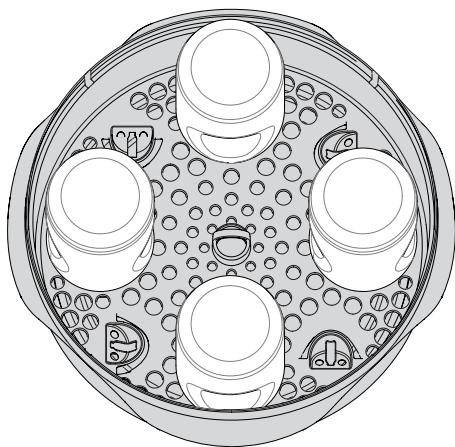


B

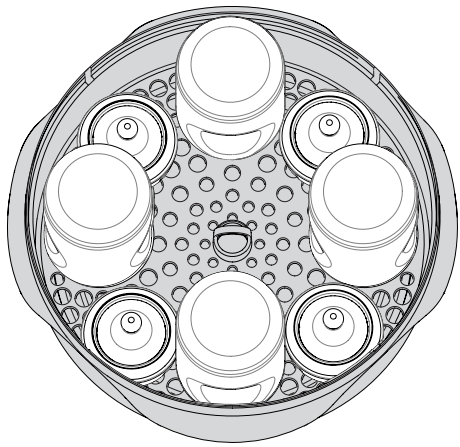

C

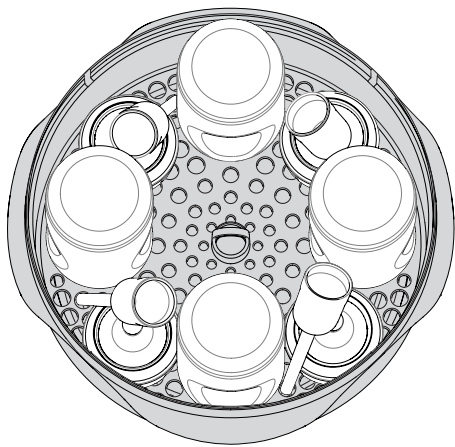

D

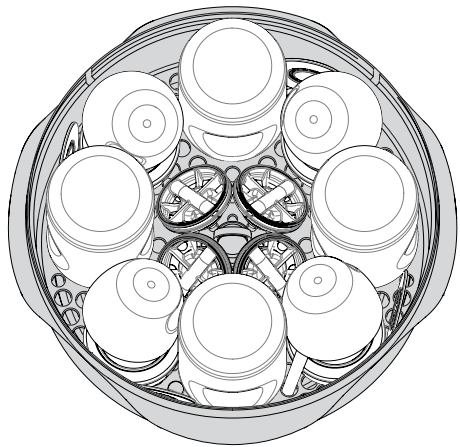


E




F




G

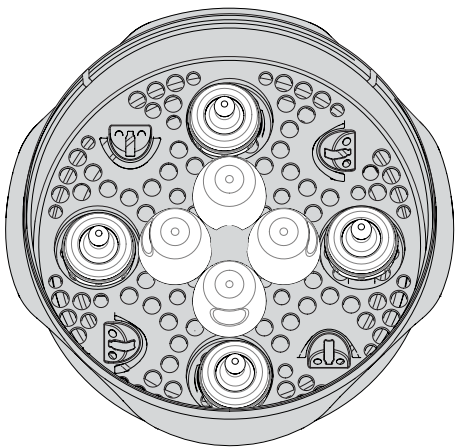


H

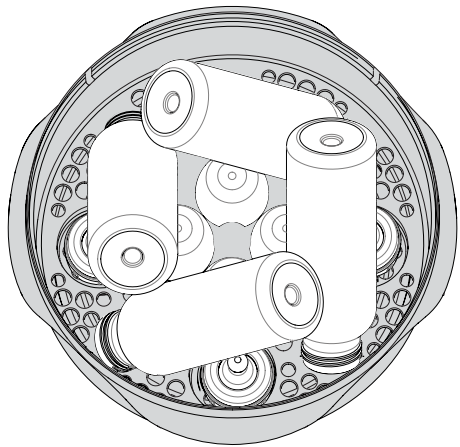

I

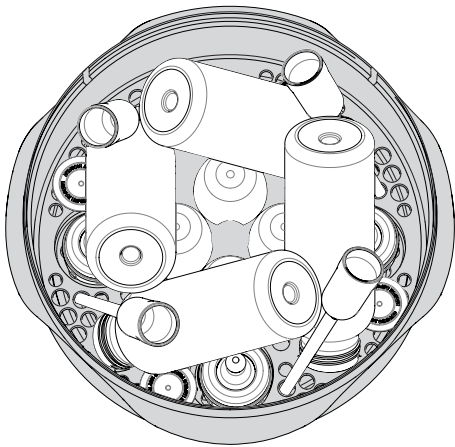

J

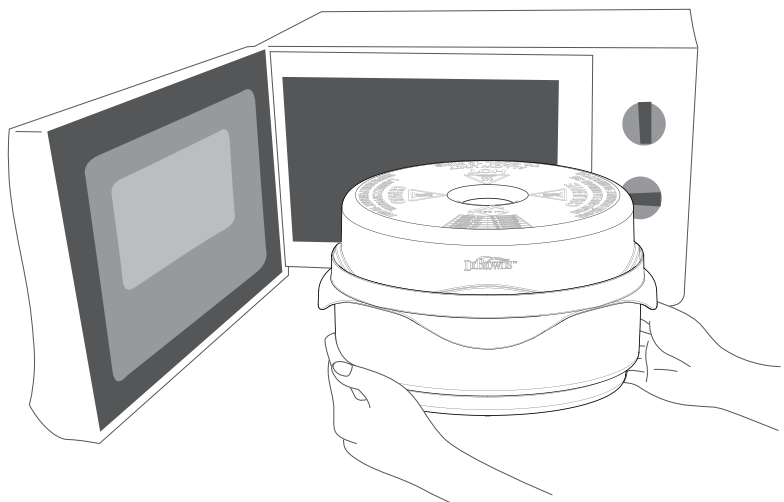

K

Dr. Brown's™ Microwave Steam Sterilizer

OPERATING INSTRUCTIONS

Cleaning and Assembly

- Fully disassemble all parts before each use.
- Thoroughly wash parts with hot soapy water and rinse.
- Rinse the lid, steam plate, and bottom of the Steam Sterilizer thoroughly with clean water.
- Place the steam plate onto the bottom. (See Diagram A)
- Pour 6 ounces (180 mL) of water into the center of the bottom.

WARNING! Never put any liquid other than tap water into the sterilizer.
Note: Failure to add the right amount of water may cause damage to the products and/or your microwave.

For Use With Wide-Neck Bottles and Related Parts

- Up to four wide-neck bottles can be sterilized at one time.
- Place the bottle neck facing downward and direct it into the round hole. (See Diagram B)
- Insert the nipple/teat into the collar, then place it between the bottles. (See Diagram C)
Note: After sterilization, hold the outer part of the bottle collar to assemble to avoid nipple/teat contamination.
- Place the reservoirs onto the steam plate. (See Diagram D)
- Place the bottle caps onto the top of the reservoirs and place the inserts and travel disks onto the steam plate. (See Diagram E)

For Use With Narrow Bottles and Related Parts

- Up to four narrow bottles can be sterilized at one time.
- Insert the nipple/teat downward into bottle collar, then direct it into the round hole. (See Diagram F)
Note: After sterilization, hold the outer part of the bottle collar to assemble to avoid nipple/teat contamination.
- Place the inserts onto the middle of the steam plate. (See Diagram G)
- Place the bottle caps to cover the inserts on the steam plate. (See Diagram H)
- Place the bottles into bottle holder slots on the steam plate so that they are supported at an approximately 45° angle. (See Diagram I)
- Place the reservoirs and travel disks onto the steam plate. (See Diagram J)

Microwave Instructions

- After properly positioning bottles and parts, place the lid on the sterilizer and insert into microwave. *Note: The sterilizer should be placed in the center of the microwave.*
- The exact time necessary to sterilize the bottles depends on the microwave wattage. Please see the attached TABLE for the correct time.

WARNING! Before using, be sure to read complete Usage Instructions with this sterilizer unit. When sterilizing, never use the unit without the recommended amount of water. After sterilizing cycle, be sure to let the unit cool for at least 10 minutes before handling. Be careful removing unit from microwave after sterilizing cycle. Water in sterilizer will be hot. Be sure to always hold sterilizer using the side handles. Do not try to lift using the handle on the lid. There are four handles, use two on opposite sides for stable grip. Mishandling the sterilizer could result in scalding. Keep out of the reach of children.

Be sure to observe Cooling Time as sterilizer unit and water will be hot.

Sanitizing Timetable:			
MICROWAVE WATTAGE	WATER	SANITIZING TIME (MINUTES)	COOLING TIME (MINUTES)
500 W	6 oz / 180 mL	8	10
700 W	6 oz / 180 mL	7	10
900 W	6 oz / 180 mL	6	10
1100 W	6 oz / 180 mL	5	10
1250 W	6 oz / 180 mL	4	10
1800 W	6 oz / 180 mL	2	10

Fits ALL Dr. Brown's bottles and most other bottle brands.

Stérilisateur vapeur pour micro-ondes Dr. Brown's
MODE D'EMPLOI

Nettoyage et assemblage

- Désassembler entièrement tous les éléments avant chaque utilisation.
- Laver méticuleusement tous les éléments à l'eau chaude et au liquide vaisselle.
- Bien rincer le couvercle, le panier à vapeur et le bac du stérilisateur à l'eau propre.
- Placer le panier à vapeur dans le bac. (voir le diagramme A)
- Verser 180 mL d'eau au centre du bac.

AVERTISSEMENT ! ne jamais mettre de liquide autre que de l'eau du robinet dans le stérilisateur.

Remarque : à défaut d'une quantité d'eau correcte, les produits et/ou le micro-ondes risquent d'être endommagés.

Pour biberons à col large et leurs éléments

- Quatre biberons à col large peuvent être stérilisés en même temps.
- Placer le col du biberon vers le bas dans le trou rond. (voir le diagramme B)
- Placer les tétines, insérées dans les bagues de serrage, entre les biberons. (voir le diagramme C)
Remarque : après la stérilisation, tenir les bagues de serrage par l'extérieur afin d'éviter de contaminer les tétines lors de l'assemblage.
- Placer les réservoirs dans le panier à vapeur. (voir le diagramme D)
- Placer les capuchons de biberon dans le haut des réservoirs et placer les inserts et les disques de voyage dans le panier à vapeur. (voir le diagramme E)

Pour biberons à col étroit et leurs éléments

- Quatre biberons à col étroit peuvent être stérilisés en même temps.
- Placer la tétine, insérée dans la bague de serrage du biberon, dans le trou rond. (voir le diagramme F)
Remarque : après la stérilisation, tenir les bagues de serrage par l'extérieur afin d'éviter de contaminer les tétines lors de l'assemblage.
- Placer les inserts au milieu du panier à vapeur. (voir le diagramme G)
- Placer les capuchons de biberon pour couvrir les inserts dans le panier à vapeur. (voir le diagramme H)
- Placer les biberons dans les fentes des porte-biberons du panier à vapeur de manière à ce qu'ils soient soutenus à un angle d'environ 45°. (voir le diagramme I)
- Placer les réservoirs et les disques de voyage dans le panier à vapeur. (voir le diagramme J)

Stérilisation au micro-ondes

- Une fois les biberons et éléments correctement en place, poser le couvercle sur le stérilisateur et mettre le tout au micro-ondes. *Remarque : le stérilisateur doit être posé au centre du micro-ondes.*
- Le temps exact nécessaire pour stériliser les biberons dépendra de la puissance du micro-ondes. Les temps corrects sont indiqués sur le TABLEAU ci-joint.

AVERTISSEMENT ! avant l'emploi, lire attentivement le mode d'emploi fourni avec ce stérilisateur. Ne jamais utiliser l'appareil sans la quantité d'eau conseillée pour stériliser. Une fois le cycle de stérilisation terminé, laisser refroidir l'appareil pendant au moins 10 minutes avant de le manipuler. Prendre garde en retirant l'appareil du micro-ondes après le cycle de stérilisation car l'eau sera chaude. Toujours tenir le stérilisateur par les poignées latérales. Ne levez pas avec la poignée du couvercle. Quatre poignées sont prévues : utiliser deux poignées opposées pour assurer une bonne prise. Une mauvaise manipulation du stérilisateur pourrait causer des brûlures graves. Tenir hors de portée des enfants.

Le stérilisateur et l'eau étant chauds, il est impératif que le temps de refroidissement soit respecté.

Tableau des temps de stérilisation :			
PUISSANCE DU MICRO-ONDES	EAU	TEMPS DE STÉRILISATION (MINUTES)	TEMPS DE REFROIDISSEMENT (MINUTES)
500 W	6 oz / 180 mL	8	10
700 W	6 oz / 180 mL	7	10
900 W	6 oz / 180 mL	6	10
1100 W	6 oz / 180 mL	5	10
1250 W	6 oz / 180 mL	4	10
1800 W	6 oz / 180 mL	2	10

Convient à TOUS les biberons Dr. Brown's et à la plupart des marques de biberons.

Esterilizador a vapor para microondas Dr. Brown's™
INSTRUCCIONES DE USO

Limpieza y montaje

- Desmonte todas las piezas por completo antes de cada uso.
- Lave muy bien todas las piezas con agua jabonosa caliente y enjuague.
- Enjuague muy bien la tapa, la bandeja de vapor y el fondo del esterilizador a vapor con agua limpia.
- Coloque la bandeja de vapor en el fondo. (Consulte el diagrama A)
- Vierta 6 oz (180 mL) de agua en el centro del fondo.

¡ADVERTENCIA! Nunca vierta en el esterilizador otro líquido que no sea agua del grifo.

Nota: Si no agrega la cantidad de agua correcta, el producto y/o su microondas puede sufrir daños.

Para uso con biberones de boca ancha y sus piezas

- Se pueden esterilizar a la vez hasta cuatro biberones de boca ancha.
- Coloque el cuello del biberón hacia abajo e introdúzcalo en el orificio redondo. (Consulte el diagrama B)
- Inserte la tetina en el cuello y después colóquela entre los biberones. (Consulte el diagrama C) *Nota: Después de la esterilización, monte el biberón sosteniéndolo por la parte externa del cuello para evitar que se contamine la tetina.*
- Coloque los depósitos en la bandeja de vapor. (Consulte el diagrama D)
- Coloque las tapas de los biberones en la parte superior de los depósitos y coloque los insertos y los discos para viaje en la bandeja de vapor. (Consulte el diagrama E)

Para uso con biberones estrechos y sus piezas

- Se pueden esterilizar a la vez hasta cuatro biberones estrechos.
- Inserte la tetina hacia abajo en el cuello del biberón y, a continuación, introdúzcala en el orificio redondo. (Consulte el diagrama F)
Nota: Después de la esterilización, monte el biberón sosteniéndolo por la parte externa del cuello para evitar que se contamine la tetina.
- Coloque los insertos en el centro de la bandeja de vapor. (Consulte el diagrama G)
- Coloque las tapas de los biberones para cubrir los insertos en la bandeja de vapor. (Consulte el diagrama H)
- Coloque los biberones en las ranuras del soporte para biberones en la bandeja de vapor de forma que queden apoyados en un ángulo de 45° aproximadamente. (Consulte el diagrama I)
- Coloque los depósitos y los discos para viaje en la bandeja de vapor. (Consulte el diagrama J)

Instrucciones para el microondas

- Después de situar los biberones y sus piezas correctamente, coloque la tapa en el esterilizador e introdúzcalo en el microondas. *Nota: El esterilizador debe colocarse en el centro del microondas.*
- El tiempo exacto necesario para esterilizar los biberones depende de la potencia del microondas. Consulte el tiempo correcto en la TABLA anexa.

¡ADVERTENCIA! Antes de utilizar, asegúrese de leer todas las Instrucciones de uso suministradas con esta unidad esterilizadora. Al llevar a cabo la esterilización, no utilice nunca la unidad sin la cantidad de agua recomendada. Después del ciclo de esterilización, asegúrese de dejar que la unidad se enfríe al menos durante diez minutos antes de manipularla. Tenga cuidado al retirar la unidad del microondas después del ciclo de esterilización. El agua del esterilizador estará caliente. Asegúrese de sujetar siempre el esterilizador por las dos asas laterales. No lo levante agarrando por el asa de la tapa. Hay cuatro asas, utilice dos en lados opuestos para un agarre estable. Una manipulación inadecuada del esterilizador podría causar quemaduras. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Asegúrese de esperar el periodo de enfriamiento correspondiente, ya que la unidad y el agua estarán calientes.

Periodo de esterilización:			
POTENCIA DEL MICROONDAS	AGUA	TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN (MINUTOS)	TIEMPO DE ENFRIAMIENTO (MINUTOS)
500 W	6 oz / 180 mL	8	10
700 W	6 oz / 180 mL	7	10
900 W	6 oz / 180 mL	6	10
1100 W	6 oz / 180 mL	5	10
1250 W	6 oz / 180 mL	4	10
1800 W	6 oz / 180 mL	2	10

Se adapta a TODOS los biberones Dr. Brown's y a la mayoría de las demás marcas.