

EN Pacidose™


①

Fill the syringe with the correct amount of medicine. Check the amount again.




②

Attach Pacidose™ to the syringe and offer it to your child.

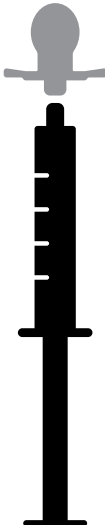

③

As your child begins to suck, slowly press in the plunger and dispense in small increments.

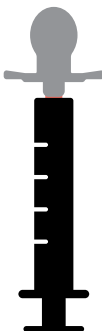

Helpful Tips

- Let your child swallow small amounts before giving more.
- Give medication when your child is hungry.
- Before using Pacidose™ with medicine, dip into milk, formula, or other liquid and let your child taste it.
- Give other liquids through Pacidose™ so your child trusts it.
- Pacidose™ is compatible with most other syringes.

WARNING!

Do not tie Pacidose™ around a child’s neck as it presents a strangulation danger. Pacidose™ is not a pacifier or a toy and is not intended for such use. Never leave a child unattended while using Pacidose™. Discard if you see any sign of damage or weakness. Clean before each use. Pacidose™ is safe for use in dishwasher (top rack only), electric and microwave sterilizers, or boiling water. Syringe hand wash only. Squeeze out any trapped water from bulb.

FR Pacidose™


①

Remplissez la seringue avec la bonne quantité de médicament. Revérifiez la quantité.




②

Attachez Pacidose™ à la seringue et offrez-la à votre enfant.

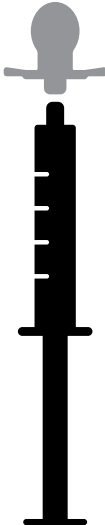

③

Lorsque l’enfant commence à téter, enfoncez délicatement le piston pour éjecter de petites quantités.

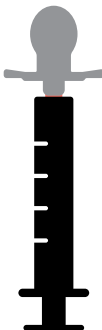

Conseils Pratiques

- Laissez l’enfant avaler de petites quantités avant de lui en donner davantage.
- Administrez les médicaments lorsque votre bébé a faim.
- Avant d’administrer des médicaments avec Pacidose™, trempez dans du lait, du lait maternisé ou un autre liquide, puis faites goûter au bébé.
- Donnez d’autres liquides avec Pacidose™ pour gagner la confiance du bébé.
- Pacidose™ convient à la plupart des autres seringues.

AVERTISSEMENT !

N’attachez pas Pacidose™ autour du cou de l’enfant, car elle présente un risque d’étranglement. Pacidose™ n’est pas un jouet ni une suce conçue pour un usage prolongé. Ne laissez jamais un enfant sans surveillance pendant qu’il utilise Pacidose™. Jetez la suce si vous détectez tout dommage ou affaiblissement. Nettoyez avant chaque usage. Lavable au plateau supérieur du lave-vaisselle. Pacidose™ convient au lave-vaisselle (plateau supérieur seulement), au stérilisateur électrique ou à micro-ondes et à l’eau bouillante. Lavez la seringue à la main seulement. Évacuez l’eau emprisonnée de la poire.

ES Pacidose™


①

Llene la jeringa con la cantidad correcta de medicina. Revise de nuevo la cantidad.




②

Conecte Pacidose™ a la jeringa y déselo al niño.

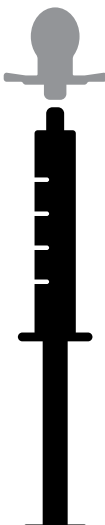

③

A medida que su hijo empiece a succionar, presione suavemente el émbolo y administre en pequeñas cantidades.

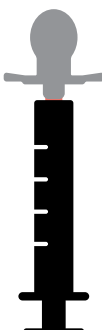

Consejos útiles

- Deje que su hijo trague pequeñas cantidades antes de darle más.
- Dele el medicamento a su niño cuando tenga hambre.
- Antes de usar Pacidose™ con medicina, moje en leche, fórmula u otro líquido y deje que su niño lo pruebe.
- Dele otros líquidos a través de Pacidose™ para ganarse la confianza de su niño.
- Pacidose™ es compatible con la mayoría de las demás jeringas.

¡ADVERTENCIA!

No ate Pacidose™ alrededor del cuello del niño, porque existe riesgo de estrangulación. Pacidose™ no es un juguete ni un chupete y no está destinado a tal uso. Nunca deje a un niño solo mientras esté usando Pacidose™. Deséchelo tan pronto lo vea dañado o frágil. Limpie antes de cada uso. Puede lavarse en la rejilla superior del lavavajillas. Pacidose™ se puede lavar en el lavavajillas (solo en la rejilla superior), en el esterilizador eléctrico o para microondas o en agua hirviendo. Lave la jeringa a mano solamente. Apriete para sacar toda el agua que haya quedado en la tetina.