


momcozy

KNEADING LACTATION MASSAGER

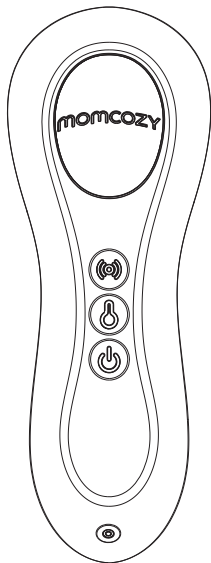

LM02

User Manual



IMPORTANT! READ AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.

→ ENGLISH


 WARNING

- This Kneading Lactation Massager is intended for a single user. It is not recommended to rent or share.
- Do NOT allow anyone unfamiliar with this product to use it.
- Do NOT use if the charging cable or product is damaged. Contact our customer service team for an exchange.
- If the charging cable casing or wiring becomes loose, separated, or frayed, stop using the charging cable immediately and contact the device manufacturer.
- Parental or guardian supervision is required at all times if users have physical or intellectual disabilities
- Do not clean or sterilize the product with a washing machine, microwave, or dishwashing machine.
- This kneading lactation massager is intended to help women overcome some breastfeeding challenges, like engorged breasts or clogged milk ducts. Please use it in strict accordance with the described purpose in this manual.
- Only use the charging cable that comes with the unit.

INDICATIONS FOR USE

Momcozy kneading lactation massager is intended to alleviate the pain and discomfort associated with breastfeeding, clogged ducts, engorgement, and mastitis. Moreover, it speeds up the let-down and milk flow.

PRODUCT OVERVIEW

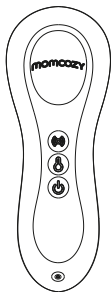

Kneading Lactation
Massager * 1



Charging Cable
* 1




Storage Bag
* 1



User Manual
* 1

PRODUCT DESCRIPTION

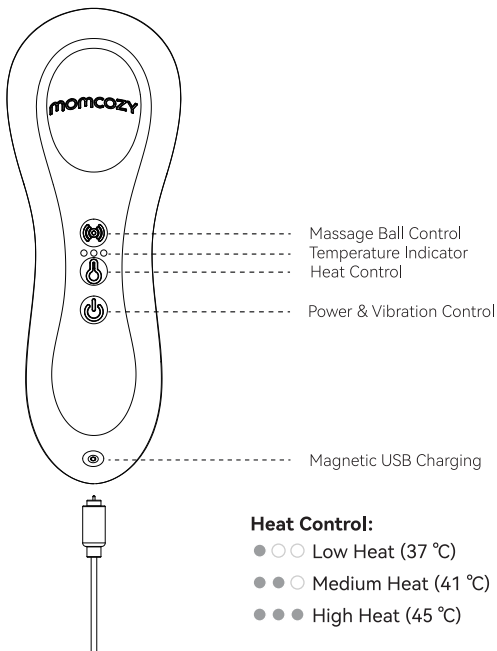

	Power/Vibration Control Press and hold for 1.5 seconds to enter standby mode, and the indicator remains solid white. This massager will change from 6 vibration patterns by pressing the power button.
	Massage Ball Control In standby mode, short press to activate the massage balls. This massager will change from low speed/medium speed/high speed/pause by pressing this button.
	Heat Control In standby mode, short press to change from low heat (37 °C)/medium heat (41 °C)/high heat (45 °C)/pause.
	Battery Indicator In charging - the indicator will be blinking white. Fully charged - the indicator will be solid white. In working - the indicator will be solid white. Low battery - the indicator will be blinking white and go out when running out of battery.

CHARGING YOUR MASSAGER


1. Connect the charging cable provided to the massager
2. Plug the USB into a computer or USB adaptor(DC 5V 1.5A).
3. The indicator will be blinking white while the massager is charging.
4. The massager is fully charged when the indicator remains solid white.
5. It takes approximately 1.5 hours to get the device fully charged. Recharge the massager as needed.

HOW TO USE


1. Use the massage balls to reach deeper into the breast ducts and gently massage the clogged area on the breast.




Deep-kneading
massage balls

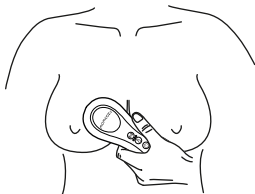

Massage the clogged area on the breast with a comfortable vibration pattern.

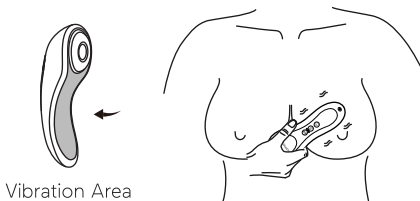


3. Allow a few minutes for the massager to reach full heat and warm the breast to stimulate milk flow.

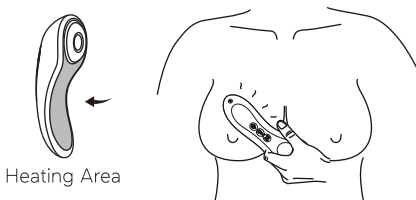

4. Massage the clogged area on the breast with the curved side, while moving towards the nipple.



Massage clogged area
with curved side

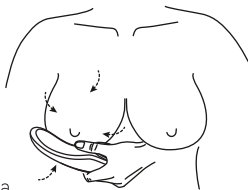

Note:

1. When heating, the device will change from high heat to low heat after 20 minutes. It will shut off automatically after heating for 30 minutes.
2. It cannot be turned on when charging.
3. Fully charge the battery before the first use.
4. Allow a few minutes for the massager to reach full heat.

CARE AND STORAGE

- Always clean your massager before and after every use.
- Unplug from power source before cleaning.
- Clean with warm water.
- Do NOT submerge the massager in water.
- Allow the massager to air dry.
- Avoid direct sunlight.
- Store the massager in a clean and dust-free place.

PRODUCT SPECIFICATION

Product Name: Kneading Lactation Massager

Model: LM02

Net Weight: 150g

Input Voltage: DC5V 1.5A

Working Temperature: 0 °C to 47 °C

Storage Temperature: -10 °C to 60 °C

Product Size: 152 mm * 55 mm * 51 mm

Battery Capacity: 1200mAh

Packaging Size: 176*86*58 mm

FCC COMPLIANCE

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.



If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

→ DEUTSCH


**WARNUNG**

- Dieses Knetmassagegerät für die Stillzeit ist für eine einzelne Benutzerin gedacht. Es wird nicht empfohlen, es zu mieten oder mit anderen zu teilen.
- Erlauben Sie NICHT, dass jemand, der mit diesem Produkt nicht vertraut ist, es benutzt.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn das Ladekabel oder das Produkt selbst beschädigt ist. Wenden Sie sich für einen Umtausch an unseren Kundendienst.
- Wenn sich die Ummantelung des Ladekabels oder die Verkabelung löst, abgetrennt ist oder ausfranst, stellen Sie die Verwendung des Ladekabels sofort ein und wenden Sie sich an den Gerätehersteller.
- Körperlich oder geistig eingeschränkte Benutzer müssen jederzeit von einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten beaufsichtigt werden
- Reinigen oder sterilisieren Sie das Produkt nicht in der Waschmaschine, Mikrowelle oder Geschirrspülmaschine.
- Dieses Knetmassagegerät für die Milchbildung soll Frauen bei der Überwindung bestimmter Stillprobleme helfen, wie z.B. gestaute Brüste oder verstopfte Milchkanäle. Bitte verwenden Sie es ausschließlich in Übereinstimmung mit dem in diesem Handbuch beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Gerät gelieferte Ladekabel.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Das Momcozy Knetmassagegerät für die Stillzeit lindert die Schmerzen und Beschwerden, die mit dem Stillen, verstopften Milchgängen, Milchstauungen und Mastitis (Brustentzündung) einhergehen. Außerdem erleichtert es das Absetzen und beschleunigt den Milchfluss.

PRODUKTÜBERSICHT

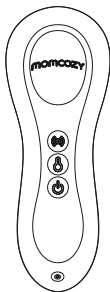

Knetmassagegerät
für die Stillzeit * 1



Aufbewahrungsbeutel
* 1




Ladekabel
* 1



Benutzerhandbuch
* 1

PRODUKTBESCHREIBUNG

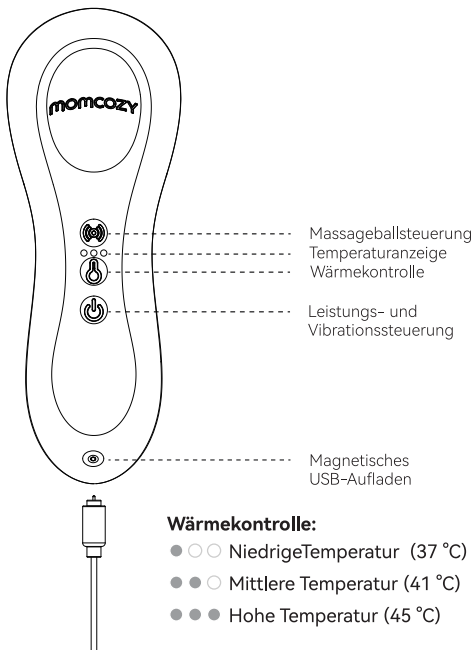

	Leistungs- und Vibrationssteuerung Halten Sie die Taste 1,5 Sekunden lang gedrückt, um in den Standby-Modus zu wechseln. Die Anzeige bleibt dauerhaft weiß. Dieses Massagegerät wechselt zwischen 6 Vibrationsmodi, wenn Sie die Einschalttaste drücken.
	Massageballsteuerung Drücken Sie im Standby-Modus kurz, um die Massagebälle zu aktivieren. Wenn Sie diese Taste drücken, wechselt das Massagegerät zwischen niedriger Geschwindigkeit/mittlerer Geschwindigkeit/hoher Geschwindigkeit/Pause.
	Wärmekontrolle Drücken Sie im Standby-Modus kurz die Taste, um zwischen niedriger Temperatur (37 °C)/mittlerer Temperatur (41 °C)/hoher Temperatur (45 °C)/Pause zu wechseln.
	Akkustandanzeige Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeige weiß. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeige dauerhaft weiß. Während des Betriebs leuchtet die Anzeige dauerhaft weiß. Bei niedrigem Akkustand blinkt die Anzeige weiß und erlischt, sobald der Akku leer ist.

SO LADEN SIE IHR MASSAGEGERÄT AUF


1. Schließen Sie das mitgelieferte Ladekabel an das Massagegerät an
2. Schließen Sie den USB-Anschluss an einen Computer oder einen USB-Adapter (DC 5 V 1,5 A) an.
3. Während das Massagegerät geladen wird, blinkt die Anzeige weiß.
4. Das Massagegerät ist vollständig aufgeladen, sobald die Anzeige dauerhaft weiß leuchtet.
5. Es dauert etwa 1,5 Stunden, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist. Laden Sie das Massagegerät nach Bedarf auf.

ANWENDUNG


1. Verwenden Sie die Massagekugeln, um tiefer in die Brustdrüsen zu gelangen und den gestauten Bereich der Brust sanft zu massieren.




Tief knetende
Massagebälle

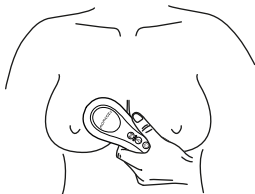

2. Massieren Sie die gestaute Stelle auf der Brust mit einem für Sie angenehmen Vibrationsmodus.

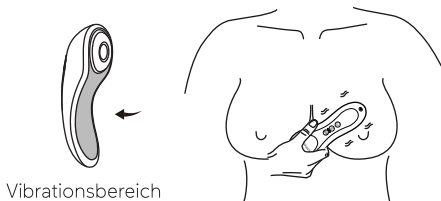

3. Es dauert ein paar Minuten, bis das Massagegerät vollständig warm wird und die Brust erwärmt, um damit den Milchfluss anzuregen.

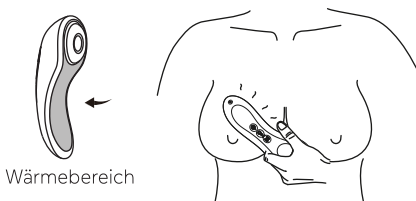

Massieren Sie den gestauten Bereich auf der Brust mit der gebogenen Seite und bewegen Sie sich dabei in Richtung der Brustwarze.



Massieren Sie den gestauten Bereich mit der gebogenen Seite



Hinweis:

1. Beim Aufheizen wechselt das Gerät nach 20 Minuten von hoher Temperatur auf niedrige Temperatur. Das Gerät schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab.
2. Beim Aufladen kann es nicht eingeschaltet werden.
3. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
4. Warten Sie ein paar Minuten, bis das Massagegerät seine volle Temperatur erreicht hat.

PFLEGE UND AUFBEWAHRUN

- Reinigen Sie Ihr Massagegerät immer vor und nach jedem Gebrauch.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Reinigen Sie es mit warmem Wasser.
- Tauchen Sie das Massagegerät NICHT unter Wasser.
- Lassen Sie das Massagegerät an der Luft trocknen.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Bewahren Sie das Massagegerät an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

PRODUKTSPEZIFIKATION

Produktbezeichnung: Knetmassagegerät für die Stillzeit
Modell: LM02

Nettogewicht: 150 g

Eingangsspannung: DC 5 V 1,5 A

Betriebstemperatur: 0 °C bis 47 °C

Aufbewahrungstemperatur: -10 °C bis 60 °C

Produktgröße: 152 mm x 55 mm x 51 mm

Akku-Kapazität: 1200 mAh

Verpackungsgröße: 176 x 86 x 58 mm

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Hinweis:

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den

Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten.

Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder positionieren Sie sie neu.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

→ **FRANÇAIS**


 AVERTISSEMENT

- Ce masseur de lactation pour l'allaitement est destiné à un seul utilisateur. Il n'est pas recommandé de le louer ou de le partager.
- Ne laissez PAS quelqu'un qui n'est pas familier avec ce produit l'utiliser.
- Ne pas utiliser si le câble de charge ou le produit est endommagé. Contactez notre équipe du service clientèle pour le remplacer.
- Si le boîtier ou le câble de charge se dégrade, si l'un ou l'autre de ces composants ne fait plus un bon contact ou s'effiloche, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le fabricant de l'appareil.
- La supervision d'un parent ou d'un tuteur est requise à tout moment si la personne qui l'utilise présente un handicap physique ou intellectuel.
- Ne pas nettoyer ou stériliser le produit avec un lave-linge, un micro-ondes ou un lave-vaisselle.
- Ce masseur pour l'allaitement est destiné à aider les femmes en cas de problèmes d'allaitement, comme l'engorgement des seins ou l'obstruction des canaux lactifères. Veuillez l'utiliser en respectant strictement l'usage décrit dans ce manuel.
- Utilisez uniquement le câble de charge fourni avec l'appareil.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Le masseur pour l'allaitement Momcozy est destiné à soulager la douleur et l'inconfort associés à l'allaitement, à l'obstruction des conduits, à l'engorgement et à la mastite. De plus, il accélère l'éjection et l'écoulement du lait.

APERÇU DU PRODUIT

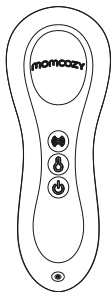

Masseur pour
l'allaitement* 1



Câble de
charge
* 1




Sac de
rangemen
* 1



Manuel d'utilisation
* 1

DESCRIPTION DU PRODUIT

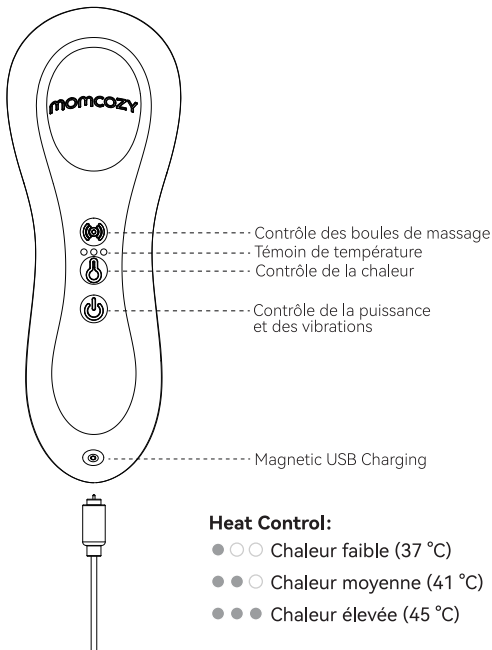

	Contrôle de la puissance/des vibrations Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 1,5 seconde pour passer en mode veille. Le voyant reste blanc. Ce masseur passe de 6 modes de vibration en appuyant sur le bouton d'alimentation.
	Contrôle des boules de massage En mode veille, appuyez brièvement pour activer les boules de massage. Ce masseur passe de la vitesse lente à la vitesse moyenne, à la vitesse rapide et à la pause en appuyant sur ce bouton.
	Contrôle de la chaleur En mode veille, appuyez brièvement sur ce bouton pour passer de la chaleur faible (37 °C) à la chaleur moyenne (41 °C), à la chaleur élevée (45 °C) et à la pause.
	Témoin de batterie En charge - le voyant clignote blanc. Pleinement chargée - le voyant reste blanc. En fonctionnement - le voyant reste blanc. Batterie faible - le voyant clignote blanc et s'éteint lorsque la batterie est épuisée.

CHARGEMENT DU MASSEUR


1. Connectez le câble de charge fourni avec l'appareil de massage
2. Branchez le câble USB sur un ordinateur ou un adaptateur USB (DC 5V 1.5A).
3. L'indicateur clignote en blanc pendant que le masseur se recharge.
4. Le masseur est complètement chargé lorsque le voyant reste blanc.
5. Il faut environ 1,5 heure pour charger complètement l'appareil . Rechargez le masseur si nécessaire.

MODE D'EMPLOI


1. Utilisez les boules de massage pour pénétrer plus profondément dans les canaux mammaires et masser doucement la zone obstruée du sein.




Boules de
massage à
pétrissage profond

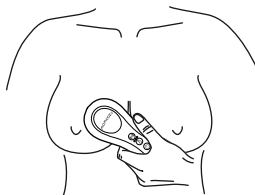

2. Massez la zone obstruée de la poitrine à l'aide d'un modèle de vibration confortable.

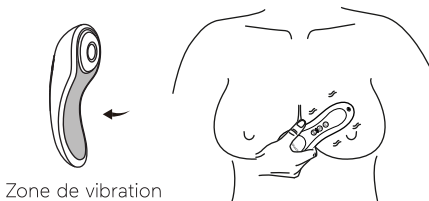


3. Attendez quelques minutes que le masseur atteigne sa température maximale et réchauffe le sein pour stimuler la montée de lait.

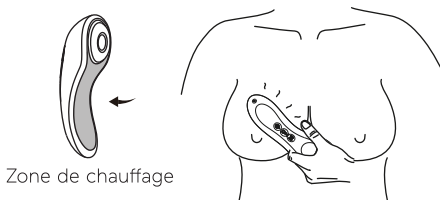

4. Massez la zone obstruée du sein avec le côté incurvé, tout en allant vers le mamelon.



Massez la zone
obstruée avec le côté
incurvé

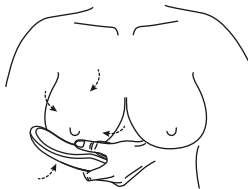

Remarque :

1. En mode de chauffage, l'appareil passe de la chaleur élevée à la chaleur faible au bout de 20 minutes. Il s'éteint automatiquement après 30 minutes de chauffage.
2. Il ne peut pas être allumé pendant la charge.
3. Chargez entièrement la batterie avant la première utilisation.
4. Attendez quelques minutes que le masseur atteigne sa pleine chaleur.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Nettoyez toujours votre masseur avant et après chaque utilisation.
- Débranchez de la source d'alimentation avant le nettoyage
- Nettoyez à l'eau chaude
- N'immergez pas le masseur dans l'eau.
- Laissez le masseur sécher à l'air libre
- Éviter la lumière directe du soleil
- Conservez le masseur dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Nom du produit : Masseur de lactation pour l'allaitement

Modèle : LM02

Poids net : 150g

Tension d'entrée : DC5V 1.5A

Température de fonctionnement : 0 °C à 47 °C

Température de stockage : -10 °C à 60 °C

Taille du produit : 152 mm * 55 mm * 51 mm

Capacité de la batterie : 1200mAh

Taille de l'emballage : 176*86*58 mm

CONFORMITÉ FCC

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque :

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour établir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre des radiofréquences et, s'il

n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est aucunement garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

→ **ESPAÑOL**




ADVERTENCIA

- Este masajeador con amasado de lactancia está destinado a una sola persona. No se recomienda prestarlo ni compartirlo.
- NO permita que nadie que no esté familiarizado con el aparato lo utilice.
- NO lo utilice si el cable de carga o el aparato están dañados. Póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para solicitar un cambio.
- Si el cable o la cubierta del cable de carga se soltara, desprendiera o rasgara, interrumpa su uso de inmediato y póngase en contacto con el fabricante del aparato.
- Se requiere la supervisión de un padre o tutor en todo momento si la persona que utiliza el aparato tiene alguna discapacidad física o intelectual.
- No limpie ni esterilice el aparato en la lavadora, el microondas o el lavavajillas.
- Este masajeador con amasado de lactancia está pensado para ayudar a las mujeres a superar algunos retos durante la lactancia, como los pechos hinchados o los conductos lácteos obstruidos. Le rogamos encarecidamente que lo utilice rigurosamente con la finalidad definida en este manual.
- Utilice únicamente el cable de carga que se proporciona con la unidad.

INDICACIONES DE USO

El masajeador con amasado de lactancia de Momcozy está pensado para aliviar el dolor y las molestias asociadas a la lactancia, los conductos obstruidos, la hinchazón de los pechos y la mastitis. Además, acelera la bajada y el flujo de la leche.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

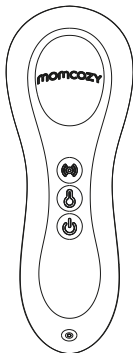

Masajeador con amasado de lactancia* 1



Bolsa de almacenamiento
* 1



Manual de usuario
* 1



Cable de carga
* 1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



	Control de la potencia/vibración Mantenga el botón pulsado durante 1,5 segundos para activar el modo de espera y el indicador pasará a estar en blanco fijo. Con cada pulsación del botón de encendido, el masajeador va cambiando entre 6 patrones de vibración diferentes.
	Control de la bola de masaje En modo de espera, pulse brevemente para activar las bolas de masaje. Pulse este botón para para cambiar la velocidad del masajeador a baja/media/alta.
	Control del calor En modo de espera, pulse brevemente para cambiar entre calor bajo (37 °C)/calor medio (41° C)/calor alto (45 °C)/pausa.
	Indicador de la batería Cargando: el indicador parpadeará en blanco. Completamente cargado: el indicador estará en blanco fijo. En funcionamiento: el indicador estará en blanco fijo. Batería baja: el indicador parpadeará en blanco y se apagará cuando se agote la batería.

CARGAR EL MASAJEADOR


1. Conecte el cable de carga que viene con el aparato al masajeador
2. Conecte el USB a un ordenador o a un adaptador USB (CC 5V 1,5 A).
3. El indicador parpadeará en blanco mientras el masajeador esté cargando.
4. El masajeador estará completamente cargado cuando el indicador permanezca en color blanco fijo.
5. El aparato tarda aproximadamente una hora y media en cargarse por completo. Cargue el masajeador tantas veces como necesite.

MODO DE UTILIZACIÓN


1. Utilice las bolas de masaje para llegar a zonas más profundas de los conductos mamarios y masajear suavemente la zona obstruida del pecho.




Bolas de masaje
con amasado
profundo

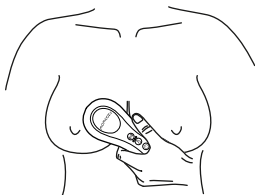

2. Masajee la zona obstruida del pecho con una vibración agradable.

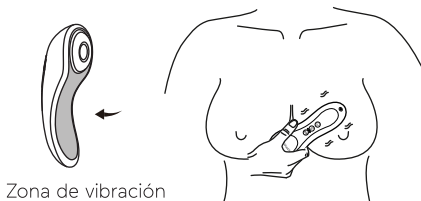

3. Espere unos minutos para que el masajeador alcance la temperatura máxima y caliente el pecho para estimular el flujo de leche.

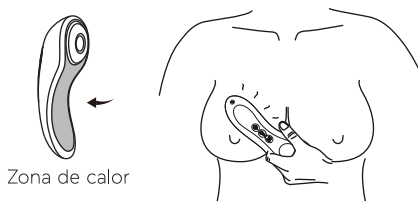

4. Masajee la zona obstruida del pecho con el lado curvo, moviéndose en dirección hacia el pezón.



Masajee la zona obstruida con el lado curvo



Nota:

1. Cuando se utilice la función de calor, el aparato cambiará automáticamente de calor alto a calor bajo al cabo de 20 minutos. Se apagará automáticamente después de calentar durante 30 minutos.
2. No puede encenderse mientras se carga.
3. Cargue completamente la batería antes de utilizarlo por primera vez.
4. Espere unos minutos para que el masajeador alcance la temperatura máxima.

CUIDADOS Y ALMACENAMIENTO

- Limpie el masajeador antes y después de cada uso.
- Desenchúfelo de la fuente de alimentación antes de limpiarlo.
- Limpie el masajeador con agua tibia.
- NO sumerja el masajeador en agua.
- Deje el masajeador secar al aire.
- Evite la luz solar directa.
- Guarde el masajeador en un lugar limpio y sin polvo.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del producto: Masajeador con amasado de lactancia

Modelo: LM02

Peso neto: 150 g

Tensión de entrada: CC 5 V 1,5 A

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 47 °C

Temperatura de almacenamiento: -10 °C a 60 °C

Tamaño del producto: 152 mm * 55 mm * 51 mm

Capacidad de la batería: 1200 mAh

Tamaño del paquete: 176 mm * 86 mm * 58 mm

CONFORMIDAD CON LA FCC

Cualquier cambio o modificación que no haya sido aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar el aparato.

El dispositivo cumple con el Apartado 15 del Reglamento de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este aparato puede causar interferencias perjudiciales y
- (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Nota:

Este equipo ha sido debidamente comprobado y revisado y se ha determinado que cumple los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con el Apartado 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera usos

y puede irradiar energía de radiofrecuencia, por lo que si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia aplicando una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la posición de la antena receptora.
- Aumente de la distancia entre el equipo emisor y el que recibe la interferencia.
- Conecte el equipo emisor a una toma de corriente distinta a la del equipo que recibe la interferencia.
- Póngase en contacto con el vendedor o con un técnico de radio y televisión para solicitar asistencia.

→ ITALIANO




AVVERTENZA

- Questo massaggiatore per l'allattamento è pensato per una sola persona. Non è consigliabile noleggiarlo o condividerlo.
- NON consentire l'uso del prodotto a persone che non ne hanno familiarità.
- NON utilizzare se il cavo di ricarica o il prodotto sono danneggiati. Contatta il nostro servizio clienti per la sostituzione.
- Se l'involucro o il cablaggio del cavo di ricarica si allentano, si separano o si sfilacciano, interrompere immediatamente l'uso del cavo di ricarica e contattare il produttore del dispositivo.
- La supervisione di genitori o tutori è richiesta in ogni momento se gli utenti hanno disabilità fisiche o intellettuali.
- Non lavare o sterilizzare il prodotto in lavatrice, nel microonde o in lavastoviglie.
- Questo massaggiatore rotante per l'allattamento ha lo scopo di aiutare le donne a superare alcuni problemi legati all'allattamento, come il gonfiore del seno o l'ostruzione dei dotti lattiferi. Si prega di utilizzarlo in modo strettamente conforme allo scopo descritto in questo manuale.
- Utilizzare esclusivamente il cavo di ricarica fornito con il dispositivo.

INDICAZIONI PER L'USO

Il massaggiatore per l'allattamento Momcozy è pensato per alleviare il dolore e il disagio associati all'allattamento, ai dotti ostruiti, all'ingorgo e alla mastite. Inoltre, accelera il flusso del latte e la sua fuoriuscita.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

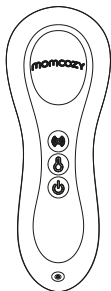

Massaggiatore rotante
per l'allattamento* 1



Cavo di ricarica
* 1




Custodia
* 1



Manuale d'uso
* 1

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

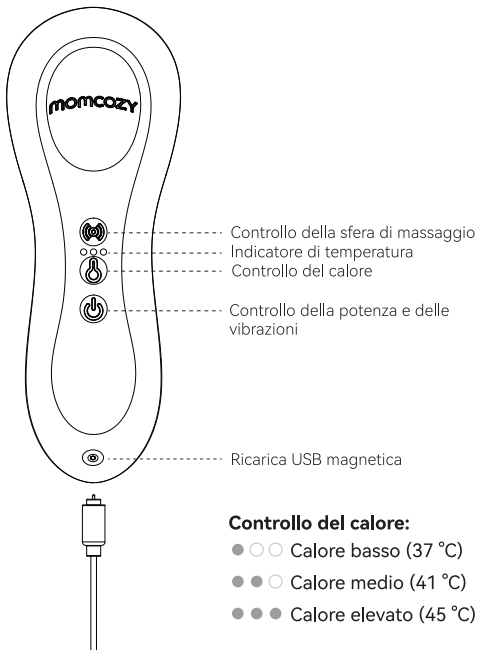


	Controllo potenza/vibrazioni Tenere premuto per 1,5 secondi per entrare in modalità standby; l'indicatore rimane bianco fisso. Questo massaggiatore cambia tra 6 modelli di vibrazione premendo il pulsante di accensione.
	Controllo della sfera di massaggio In modalità standby, premere brevemente per attivare le sfere massaggianti. Il massaggiatore passa da bassa velocità/media velocità/alta velocità/pausa premendo questo pulsante.
	Controllo del calore In modalità standby, premere brevemente per passare da calore basso (37°C)/calore medio (41 °C)/calore alto (45 °C)/pausa.
	Indicatore della batteria In carica - l'indicatore lampeggia in bianco. Completamente carico - l'indicatore è bianco fisso. In funzione - l'indicatore sarà bianco fisso. Batteria scarica - l'indicatore lampeggia in bianco e si spegne quando la batteria è scarica.

CARICARE IL MASSAGGIATORE


1. Collegare il cavo di ricarica in dotazione al massaggiatore.
2. Collegare l'USB a un computer o a un adattatore USB (DC 5V 1.5A).
3. L'indicatore lampeggia in bianco mentre il massaggiatore è in carica.
4. Il massaggiatore è completamente carico quando l'indicatore rimane bianco fisso.
5. Sono necessarie circa 1,5 ore per caricare completamente il dispositivo. Ricaricare il massaggiatore quando necessario.

COME SI USA


1. Utilizzare le sfere massaggianti per raggiungere in profondità i dotti mammari e massaggiare delicatamente l'area ostruita del seno.

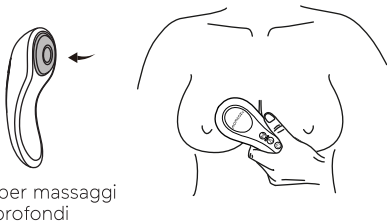

2. Massaggiare l'area intasata del seno con un comodo schema di vibrazione.

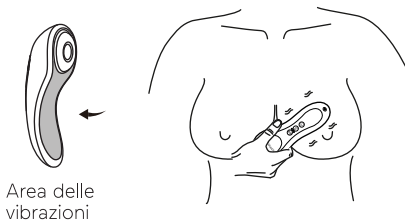

3. Lasciare qualche minuto affinché il massaggiatore raggiunga il massimo calore e riscaldi il seno per stimolare il flusso del latte.

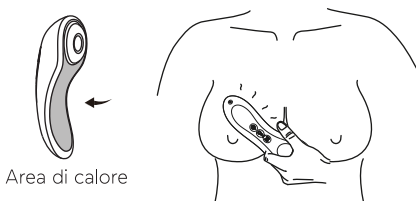



4. Massaggiare l'area ostruita sul seno con il lato curvo, muovendosi verso il capezzolo.



Massaggiare l'area
ostruita con il lato
curvo



Attenzione:

1. Durante il riscaldamento, il dispositivo passa dal calore alto al calore basso dopo 20 minuti. Si spegne automaticamente dopo 30 minuti di riscaldamento.
2. Non può essere acceso durante la ricarica.
3. Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.
4. Lasciare trascorrere qualche minuto affinché il massaggiatore raggiunga il massimo del calore.



CURA E CONSERVAZIONE

- Pulire sempre il massaggiatore prima e dopo ogni utilizzo.
- Prima della pulizia, scollegare la spina dalla fonte di alimentazione.
- Pulire con acqua calda.
- NON immergere il massaggiatore in acqua.
- Lasciare asciugare il massaggiatore all'aria.
- Evitare la luce diretta del sole.
- Conservare il massaggiatore in un luogo pulito e privo di polvere.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nome del prodotto: Massaggiatore rotante per l'allattamento

Modello: LM02

Peso netto: 150g

Tensione di ingresso: DC5V 1,5A

Temperatura di funzionamento: Da 0 °C a 47 °C

Temperatura di conservazione: Da -10 °C a 60 °C

Dimensioni del prodotto: 152 mm x 55 mm x 51 mm

Capacità batteria: 1200mAh

Dimensioni della confezione: 176 x 86 x 58 mm



CONFORMITÀ FCC

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbe comportare la revoca dell'autorizzazione all'uso del dispositivo da parte dell'utente.

Questo dispositivo è conforme alla sezione 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Attenzione:

Questa attrezzatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti disposti per un dispositivo digitale di classe B ai sensi della sezione 15 delle norme FCC. Questi limiti sono predisposti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose nel contesto di un'installazione residenziale. Questo apparecchio



genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere individuate accendendo e spegnendo l'apparecchio, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto.