


momcozy

NS005

Silver Nipple Protective Cups

User Manual

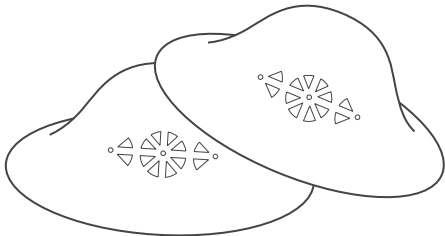

EN

DE

FR

IT

ES

BL

CS

DA

FI

NL

NO

PL

PT

SV

Before using this product, please read this user manual carefully and keep it safe for future reference.

Contents


EN	02
DE	06
FR	10
IT	14
ES	18
BL	22
CS	26
DA	30
FI	34
NL	38
NO	42
PL	46
PT	50
SV	52

Product Name	Silver Nipple Protective Cups
Product Material	999 Fine Silver
Product Size	Three sizes to choose from: Regular, XL, XXL
Suitable for	The Silver Nipple Protective Cup is primarily designed for addressing discomfort in breastfeeding women experiencing discomfort such as dryness, cracking, or pain in the nipples.
Intended use	The silver protective cup helps alleviate friction between clothing and dry, cracked, or painful nipples.


Product Size	Regular	XL	XXL
Width	1.77inches/ 45mm	2.16inches/ 55mm	2.56inches/ 65mm
Height	0.63inches/ 16mm	0.71inches/ 18mm	0.79inches/ 20mm
Applicable Areola Sizes	Smaller than 1.8 inches	Larger than 1.8 inches and smaller than 2.2 inches	Larger than 2.2 inches

How to use

- Wash and dry your hands thoroughly before using the shield.
- Clean the nipple area and the silver cups with wipes

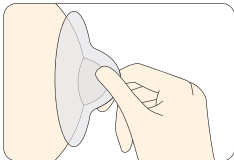

1. Gently place the silver nipple protective cup just on top of the nipple;

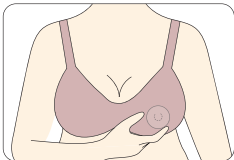

2. After adjusting the position, wear your bra comfortably.

Cleaning and Storage

1. After daily use, rinse with water and dry thoroughly.

2. Since the cups are made of pure silver, long-term exposure to air, moisture, sweat, etc. will cause the surfaces of the cups to turn slightly black and yellow, which is normal.
3. If the silver nipple protective cup shows signs of discoloration, make a paste using baking soda with a small amount of water, rub it gently onto the caps, rinse thoroughly, and dry.
4. When not in use for a long time, clean and store them in a dry place.
5. Be careful when wearing it.
6. The inner walls of the cups are very thin.
7. Strong impact may cause slight deformation of the products.

If you have any questions, please contact us by email.



support@momcozy.com



b2bcs@momcozy.com



+1-855-322-1777




Mon-Sun, 8AM-5PM, EST

Produktname	Silberne Brustwarzen-Schutzschale
Produktmaterial	999 Feinsilber
Produktgrößen	Drei Größen stehen zur Auswahl: Standard, XL, XXL
Geeignet für	Der silberne Brustwarzenschutzschale wurde in erster Linie für stillende Frauen entwickelt, die unter Beschwerden wie Trockenheit, Rissen oder Schmerzen an den Brustwarzen leiden.
Silberne Brustwarzen-Schutzschale	Die silberne Schutzschale trägt dazu bei, Reibungen zwischen Kleidung und trockenen, rissigen oder schmerzhaften Brustwarzen zu vermeiden.


Produktgrößen	Standard	XL	XXL
Breite	1,77 Zoll/ 45 mm	2,16 Zoll/ 55 mm	2,56 Zoll/ 65 mm
Höhe	0,63 Zoll/ 16 mm	0,71 Zoll/ 18 mm	0,79 Zoll/ 20 mm
Anwendbare Areola- Größen	Kleiner als 1,8 Zoll	Größer als 1,8 Zoll und kleiner als 2,2 Zoll	Größer als 2,2 Zoll

Anwendung

- Reinigen und trocknen Sie Ihre Hände gründlich, ehe Sie das Schild verwenden.
- Reinigen Sie den Brustwarzenbereich und die silberfarbenen Schalen mit Feuchttüchern.

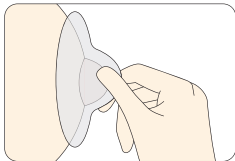

1. Setzen Sie die silberne Brustwarzen-Schutzschale sanft auf die Brustwarze;

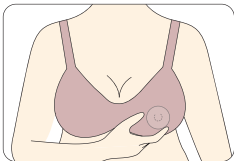

2. Tragen Sie Ihren BH nach dem Einstellen der Position bequem.

Reinigung und Aufbewahrung

1. Nach der täglichen Anwendung mit Wasser abspülen und gründlich trocknen.

2. Da die Schalen aus reinem Silber bestehen, kann die Oberfläche der Schalen bei längerer Einwirkung von Luft, Feuchtigkeit, Schweiß usw. leicht schwarz und gelb werden, was jedoch normal ist.
3. Wenn die silbernen Nippelschutzkappen Verfärbungen zeigen, mischen Sie etwas Backpulver mit Wasser zu einer Paste, tragen Sie diese vorsichtig auf die Kappen auf, spülen Sie sie anschließend gründlich ab und trocknen Sie sie danach.
4. Reinigen Sie sie, wenn Sie sie längere Zeit nicht verwenden, und bewahren Sie sie an einem trockenen Ort auf.
5. Seien Sie beim Tragen vorsichtig. Die inneren Wände der Schalen sind sehr dünn. Starke Stöße können zu leichten Verformungen der Produkte führen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an uns.



support@momcozy.com



b2bcs@momcozy.com



+1-855-322-1777




Mon-Sun, 8AM-5PM, EST

Nom du produit	Coupelle argentée de protection pour mamelons
Matériau du produit	999 Feinsilber
Tailles du produit	Trois tailles au choix : Standard, XL, XXL
Convient à	La coupelle argentée de protection des mamelons est principalement conçue pour soulager à le malaise des femmes allaitantes ou souffrant de sécheresse, de gerçures ou de douleurs au niveau des mamelons.
Coupelle argentée de protection pour mamelons	La coupelle argentée de protection aide à réduire la friction entre les vêtements et les mamelons secs, crevassés ou douloureux.


Tailles du produit	Régulier	XL	XXL
Largeur	1,77 pouces/ 45 mm	2,16 pouces/ 55 mm	2,56 pouces/ 65 mm
Hauteur	0,63 pouces/ 16 mm	0,71 pouces/ 18 mm	0,79 pouces/ 20 mm
Tailles d'aréoles applicables	Moins de 1,8 pouces	Plus de 1,8 pouce, et moins de 2,2 pouces	Plus de 2,2 pouces

Comment l'utiliser

- Lavez-vous les mains et séchez-les soigneusement avant d'utiliser la tétérèlle.
- Nettoyez la zone du mamelon et les coupelles argentées à l'aide d'une lingette.

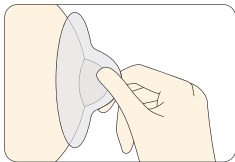

1. Placez délicatement la coupelle argentée de protection juste au-dessus du mamelon ;

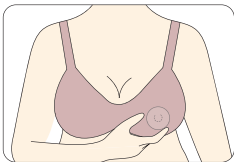

2. Ajustez correctement sa position, puis portez votre soutien-gorge confortablement.

Nettoyage et rangement

1. Après une bonne journée d'utilisation, rincez à l'eau et laissez

séchez soigneusement.

2. Les coupelles étant conçues en argent pur, une exposition prolongée à l'air, à l'humidité, à la sueur, etc. pourra entraîner une légère coloration noire et jaune des surfaces des coupelles, ce qui est normal.
3. Si la téterelle protectrice argentée présente des signes de décoloration, préparez une pâte à base de bicarbonate de soude et d'un peu d'eau, frottez-la délicatement sur les capuchons, puis rincez abondamment et séchez.
4. Si vous ne prévoyez pas l'utiliser pendant une longue période, nettoyez-les et rangez-les dans un endroit sec.
5. Portez-les avec soin. Les parois internes des bonnets sont très fines. Le produit pourrait légèrement se déformer s'il est soumis à des forces importantes.

Si vous avez des questions, veuillez contacter par E-mail.



support@momcozy.com



b2bcs@momcozy.com



+1-855-322-1777




Mon-Sun, 8AM-5PM, EST

Nome del prodotto	Coppetta protettiva per capezzoli in argento
Materiale prodotto	Argento 999
Misure prodotto	Tre misure disponibili: Regolare, XL, XXL
Adatto per	La coppetta protettiva per capezzoli in argento è stata studiata principalmente per affrontare i disagi delle donne che allattano al seno, quali secchezza, screpolature o dolore ai capezzoli.
Coppetta protettiva per capezzoli in argento	La coppetta protettiva in argento aiuta ad alleviare l'attrito tra gli indumenti e i capezzoli secchi, screpolati o doloranti.


Misure prodotto	Regolare	XL	XXL
Larghezza	1,77 pollici/ 45 mm	2,16 pollici/ 55 mm	2,56 pollici/ 65 mm
Altezza	0,63 pollici/ 16 mm	0,71 pollici/ 18 mm	0,79 pollici/ 20 mm
Dimensioni dell'areola applicabili	Meno di 1,8 pollici	Più di 1,8 pollici e meno di 2,2 pollici	Più di 2,2 pollici

Come si usa

- Lavare e asciugare accuratamente le mani prima di utilizzare la protezione.
- Pulire l'area del capezzolo e le coppette in argento con le salviette.

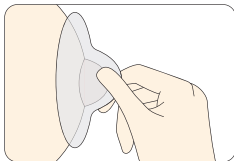

1. Posizionare delicatamente sopra il capezzolo la coppetta protettiva;

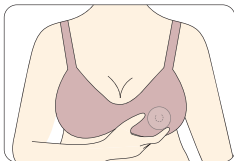

2. Dopo aver regolato la posizione, indossare comodamente il reggiseno.

Pulizia e conservazione

1. Dopo l'uso quotidiano, sciacquare con acqua e asciugare accuratamente.

2. Poiché le coppette sono realizzate in argento puro, è normale che l'esposizione prolungata all'aria, all'umidità, al sudore, ecc. renda leggermente nere e gialle le superfici delle coppette.
3. Se la coppetta protettiva per capezzoli in argento mostra segni di scolorimento, preparare una pasta con bicarbonato di sodio e una piccola quantità di acqua, strofinarla delicatamente sulle coppette, risciacquare accuratamente e asciugare.
4. Quando non vengono utilizzate per lungo tempo, pulirle e conservarle in un luogo asciutto.
5. Fare attenzione quando si indossano. Le pareti interne delle coppette sono molto sottili. Un forte urto può causare una leggera deformazione del prodotto.

Se avete domande, contattateci via e-mail.



support@momcozy.com



b2bcs@momcozy.com



+1-855-322-1777




Mon-Sun, 8AM-5PM, EST

Nombre del producto	Copas protectoras de pezones de plata
Material del producto	999 plata fina
Tamaños del producto	Tres tamaños para elegir: Regular, XL, XXL
Uso previsto	Las copas protectoras de pezones de plata están diseñadas principalmente para hacer frente a las molestias que experimentan las mujeres lactantes como sequedad, agrietamiento o dolor en los pezones.
Copas protectoras de pezones de plata	Las copa protectoras de plata ayudan a aliviar la fricción entre la ropa y los pezones secos, agrietados o adoloridos.


Tamaños del producto	Regular	XL	XXL
Ancho	1,77 pulgadas/ 45 mm	2,16 pulgadas/ 55 mm	2,56 pulgadas/ 65 mm
Alto	0,63 pulgadas /16 mm	0,71 pulgadas /18 mm	0,79 pulgadas /20 mm
Tamaños de areola aplicables	Menor que 1,8 pulgadas	Mayor que 1,8 pulgadas y menor que 2,2 pulgadas	Mayor que 2,2 pulgadas

Modo de uso

- Debe lavar bien las manos y secarlas antes de usar los protectores de pezones.
- Limpie la zona del pezón y las copas de plata con toallitas húmedas.

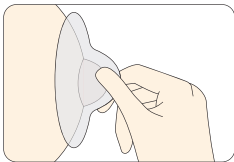

1. Coloque suavemente la copa protectora del pezón de plata justo encima del pezón;

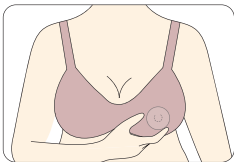

2. Después de ajustar la posición, use un sujetador cómodamente.

Limpieza y almacenamiento

1. Después del uso diario, enjuague las copas con agua y séquelas bien.

2. Ya que las copas están hechas de plata pura, la exposición a largo plazo al aire, humedad, sudor, etc., hará que las superficies de las copas se vuelvan un poco más negras y amarillas, lo que es normal.
3. Si la copa protectora plateada para los pezones muestra signos de decoloración, prepara una pasta con bicarbonato de sodio y un poco de agua, frótala suavemente sobre la copa, acláralo bien y deja secar.
4. Si no las va a usar durante mucho tiempo, límpielas y guárdelas en un lugar seco.
5. Tenga cuidado cuando las use. Las paredes interiores de las copas son muy delgadas. Si se produce un impacto fuerte podrían deformarse ligeramente.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico.



support@momcozy.com



b2bcs@momcozy.com



+1-855-322-1777




Mon-Sun, 8AM-5PM, EST

Productnaam	Zilveren tepelbeschermers
Materiaal	999 fijn zilver
Grootte	U kunt kiezen uit drie maten: Regular, XL, XXL
Geschikt voor	Deze tepelbeschermers van fijn zilver zijn speciaal ontwikkeld om ongemak te verlichten bij vrouwen die borstvoeding geven en last hebben van droogheid, kloofjes of pijnlijke tepels.
Zilveren tepelbeschermer	Het zilveren beschermkapje vermindert de wrijving tussen kleding en droge, gekloofde of pijnlijk geïrriteerde tepels.


Grootte	Regular	XL	XXL
Breedte	45 mm	55 mm	65 mm
Diepte	16 mm	18 mm	20 mm
Diameter van de tepelhof	Minder dan 4,5 cm	Meer dan 4,5 cm en minder dan 5,5 cm	Meer dan 5,5 cm

Gebruik

- Was en droog uw handen grondig vóór u de beschermers gebruikt.
- Reinig de tepel en de zilveren kapjes met vochtige doekjes.

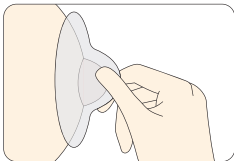

1. Plaats de zilveren tepelbeschermer voorzichtig over de tepel;

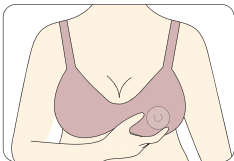

2. Nadat u de beschermer goed op zijn plaats hebt aangebracht, kunt u uw beha comfortabel dragen.

Reinigen en bewaren

1. Spoel na dagelijks gebruik af met water en droog zorgvuldig.

2. Omdat de kapjes van zuiver zilver zijn gemaakt, kan langdurige blootstelling aan lucht, vocht, zweet, enz. tot gevolg hebben dat het oppervlak licht zwart of geel verkleurt. Dit is normaal.
3. Gebruik een pasta gemaakt van bicarbonaat en een beetje water als de zilveren tepelbeschermers tekenen van verkleuring vertonen, wrijf deze voorzichtig op de caps, spoel grondig en droog af.
4. Als u de beschermers gedurende langere tijd niet gebruikt, moet u ze reinigen en op een droge plaats bewaren.
5. Wees voorzichtig als u de beschermers draagt.
6. Het materiaal waarvan de beschermer is gemaakt, is erg dun.
7. Een harde stoot kan lichte vervormingen van het kapje veroorzaken.

Als u vragen hebt, kun u ons contacteren via e-mail.



support@momcozy.com



b2bcs@momcozy.com



+1-855-322-1778




Maandag t.e.m. zondag, 8.00-17.00 u, EST (VS-oostkust)

Název výrobku	Stříbrné ochranné kloboučky na bradavky
Materiál výrobku	Stříbro s ryzostí 999
Velikost výrobku	Na výběr jsou k dispozici tři velikosti: Standardní, XL, XXL
Vhodné pro	Stříbrný ochranný klobouček na bradavky je primárně určen k řešení nepříjemných pocitů u kojících žen trpících problémy, jako je suchost, praskání nebo bolest bradavek.
Stříbrný ochranný klobouček na bradavky	Stříbrný ochranný klobouček pomáhá zmírnit tření mezi oblečením a suchými, popraskanými nebo bolestivými bradavkami.


Velikost výrobku	Standardní	XL	XXL
Šířka	1,77 palce/ 45 mm	2,16 palce/ 55 mm	2,56 palce/ 65 mm
Výška	0,63 palce/ 16 mm	0,71 palce/ 18 mm	0,79 palce/ 20 mm
Použitelné velikosti prsních dvorců	Menší než 1,8 palce	Větší než 1,8 palce a menší než 2,2 palce	Větší než 2,2 palce

Způsob použití

- Před použitím chrániče si důkladně umyjte a osušte ruce.
- Oblast bradavky a stříbrné kloboučky očistěte pomocí ubrousků.

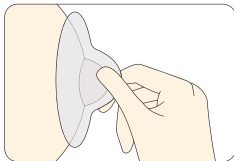

1. Opatrně nasadíte stříbrný ochranný klobouček na bradavku.

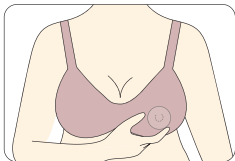

2. Po úpravě polohy si pohodlně obléknete podprsenku.

Čištění a skladování

1. Po každodenním použití kloboučky opláchněte vodou a

důkladně je osušte.

2. Protože jsou kloboučky vyrobeny z čistého stříbra, dlouhodobé vystavení vzduchu, vlhkosti, potu atd. způsobí, že povrch kloboučků mírně zčerná a zežloutne, což je normální.
3. Pokud stříbrný ochranný klobouček na bradavky vykazuje známky změny zbarvení, vytvořte pastu z jedlé sody a malého množství vody, jemně ji naneste na kloboučky, důkladně opláchněte a osušte.
4. Pokud kloboučky delší dobu nepoužíváte, očistěte je a uložte na suchém místě.
5. Při nošení dávejte pozor.
6. Vnitřní stěny kloboučků jsou velmi tenké.
7. Silný náraz může způsobit mírnou deformaci kloboučků.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte e-mailem.



support@momcozy.com



b2bcs@momcozy.com



+1-855-322-1779




Po-Ne, 8:00-17:00, EST

Produktnavn	Brystvortebeskyttende sølvkopper
Produktmateriale	999 fint sølv
Produktstørrelse	Vælg mellem tre størrelser: Regular, XL, XXL
Egnet til	Brystvortebeskyttende sølvkop er primært designet til at afhjælpe ubehag hos ammende kvinder, der oplever ubehag som tørhed, revner eller ømhed i brystvorterne.
Brystvortebeskyttende sølvkop	Den beskyttende sølvkop hjælper med at afhjælpe friktion mellem tøj og tørre, revnede eller ømme brystvorter.


Produktstørrelse	Regular	XL	XXL
Bredde	1,77 tommer/ 45 mm	2,16 tommer/ 55 mm	2,56 tommer/ 65 mm
Højde	0,63 tommer/ 16 mm	0,71 tommer/ 18 mm	0,79 tommer/ 20 mm
Anvendelige areola-størrelser	Mindre end 1,8 tommer	Større end 1,8 tommer og mindre end 2,2 tommer	Større end 2,2 tommer

Sådan bruges den

- Vask og tør hænderne grundigt, før du bruger skjoldet.
- Rengør brystvorteområdet og sølvkopperne med klude.

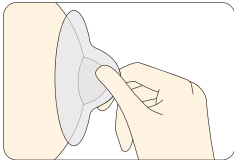

1. Placer forsigtigt den brystvortebeskyttende sølvkop direkte oven på brystvorten;

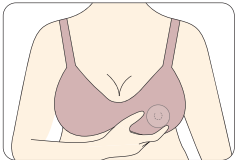

2. Når positionen er indstillet, er bh'en behagelig at have på.

Rengøring og opbevaring

1. Skyl efter daglig brug med vand og tør grundigt.
2. Da kopperne er lavet af rent sølv, vil lang tids eksponering for

luft, fugt, sved osv. medføre, at koppernes overflade bliver lidt sort og gul, hvilket er normalt.

3. Hvis den brystvortebeskyttende sølvkop viser tegn på misfarvning, lav en pasta af bagepulver og en smule vand, gnid den forsigtigt på kopperne, skyl grundigt og tør af.
4. Hvis de ikke har været brugt i længere tid, skal de rengøres og opbevares et tørt sted.
5. Vær forsigtig, når du har den på.
6. Koppernes indre vægge er meget tynde.
7. Kraftig påvirkning kan forårsage let deformation af produkterne.

Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte os via e-mail.



support@momcozy.com



b2bcs@momcozy.com



+1-855-322-1780




Man-søn, kl. 8-17, EST

Tuotteen nimi	Hopeiset nänkien suojakupit
Tuotteen materiaali	999 puhdas hopea
Tuotteen koko	Saatavana kolme kokoa: normaali, XL, XXL
Käyttötarkoitus	Hopeinen nänkin suojakuppi on tarkoitettu ensisijaisesti vähentämään imettävien naisten kokemia haittoja, kuten nänkien kuivumista, halkeilua tai kipua.
Hopeinen nänkin suojakuppi	Hopeinen suojakuppi auttaa vähentämään kitkaa vaatteiden ja kuivien, halkeilevien tai kivuliaiden nänkien välillä.


Tuotteen koko	Normaali	XL	XXL
Leveys	45 mm / 1,77 tuumaa	55 mm / 2,16 tuumaa	65 mm / 2,56 tuumaa
Korkeus	16 mm / 0,63 tuumaa	18 mm / 0,71 tuumaa	20 mm / 0,79 tuumaa
Sopivat nännipihan koot	Alle 1,8 tuumaa	Yli 1,8 tuumaa ja alle 2,2 tuumaa	Yli 2,2 tuumaa

Käyttö

- Pese ja kuivaa kädet huolellisesti ennen suojuksen käyttämistä.
- Puhdista nännin alue ja hopeakupit pyyhkeillä.

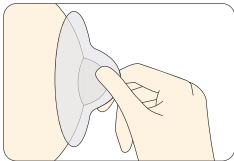

1. Aseta hopeinen nännin suojakuppi varovasti nännin päälle.

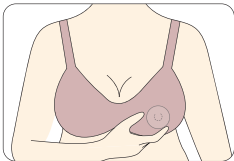

2. Kun olet säätänyt sen asennon, pue rintaliivit mukavasti.

Puhdistus ja säilytys

1. Huuhtelee päivittäisen käytön jälkeen vedellä ja kuivaa huolellisesti.

2. Koska kupit on valmistettu puhtaasta hopeasta, pitkäaikainen altistuminen ilmalle, kosteudelle, hiele yms. aiheuttaa kuppien pintojen tummumista ja kellastumista, mikä on normaalia.
3. Jos hopeisessa nännin suojakupissa näkyy värimuutoksia, tee tahna ruokasoodasta ja pienestä määrästä vettä, hiero sitä hellävaraisesti kuppeihin, huuhtelee huolellisesti ja kuivaa.
4. Jos niitä ei käytetä pitkään aikaan, puhdista ne ja säilytä niitä kuivassa paikassa.
5. Ole varovainen, kun käytät niitä.
6. Kuppien sisäseinämät ovat hyvin ohuet.
7. Voimakas isku voi aiheuttaa tuotteisiin vähäisiä muodonmuutoksia.

Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä sähköpostilla.



support@momcozy.com



b2bcs@momcozy.com



+1-855-322-1781




ma-su, 8.00–17.00 EST

Productnaam	Zilveren tepelbeschermende cups
Productmateriaal	999 fijn zilver
Productmaat	Keuze uit drie maten: Standaard, XL, XXL
Geschikt voor	De Silver Nipple Protective Cup is in de eerste plaats ontworpen voor vrouwen die borstvoeding geven en last hebben van ongemakken zoals droogheid, kloven of pijn aan de tepels.
Zilveren tepelbeschermende cup	De zilveren beschermcup helpt wrijving tussen kleding en droge, gebarsten of pijnlijke tepels te verlichten.


Productmaat	Normaal	XL	XXL
Breedte	1,77 inch/ 45 mm	2,16 inch/ 55 mm	2,56 inch/ 65 mm
Hoogte	0,63 inch/ 16 mm	0,71 inch/ 8 mm	0,79 inch/ 20 mm
Geschikt voor tepelhofmaten	Kleiner dan 1,8 inch	Groter dan 1,8 inch en kleiner dan 2,2 inch	Groter dan 2,2 inch

Gebruik

- Was en droog uw handen grondig voordat u het schild gebruikt.
- Reinig de tepel en de zilveren cups met doekjes.

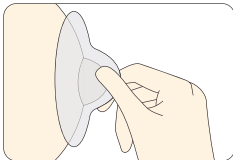

1. Plaats de zilveren tepelbeschermcup voorzichtig bovenop de tepel;

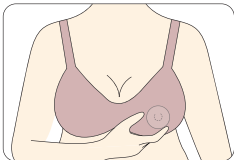

2. Draag u beha op een comfortabele manier nadat u de positie hebt aangepast.

Reiniging en opslag

1. Na dagelijks gebruik afspoelen met water en goed afdrogen.
2. Omdat de cups van puur zilver zijn gemaakt, zal langdurige

blootstelling aan lucht, vocht, zweet, enz. ervoor zorgen dat de oppervlakken van de cups een beetje zwart en geel worden, wat normaal is.

3. Als de zilveren tepelbeschermende cup tekenen van verkleuring vertoont, maak dan een pasta van bakpoeder en een beetje water, wrijf het voorzichtig op de cups, spoel grondig en droog af.
4. Maak ze, wanneer u ze lange tijd niet gebruikt schoon en bewaar ze op een droge plaats.
5. Wees voorzichtig wanneer u ze draagt.
6. De binnenwanden van de cups zijn erg dun.
7. Sterke schokken kunnen lichte vervorming van de producten veroorzaken.

Als u vragen heeft, kunt u per e-mail contact met ons opnemen.



support@momcozy.com



b2bcs@momcozy.com



+1-855-322-1782




Ma t/m zo, 8.00 - 17.00 uur, EST

Produktnavn	Brystvortebeskyttere i sølv
Produktmateriale	999 rent sølv
Produktstørrelse	Tre størrelser å velge mellom: Regular, XL, XXL
Egnet for	Brystvortebeskytterne i sølv er først og fremst utviklet for å lindre ubehag hos ammende kvinner, som tørrhet, sprekker eller smerter i brystvortene.
Brystvortebeskytter i sølv	Brystvortebeskytteren i sølv bidrar til å redusere friksjonen mellom klær og tørre, sprukne eller smertefulle brystvorter.


Produktstørrelse	Regular	XL	XXL
Bredde	1,77 tommer / 45 mm	2,16 tommer / 55 mm	2,56 tommer / 65 mm
Høyde	0,63 tommer / 16 mm	0,71 tommer / 18 mm	0,79 tommer / 20 mm
Størrelse på areola	Mindre enn 1,8 tommer	Større enn 1,8 tommer og mindre enn 2,2 tommer	Større enn 2,2 tommer

Bruk

- Vask og tørk hendene grundig før du bruker skjoldet.
- Rengjør brystvorteområdet og sølvkoppene med våtservietter.

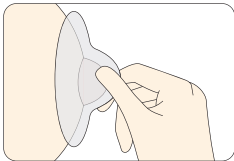

1. Plasser brystvortebeskytteren i sølv forsiktig på toppen av brystvorten.

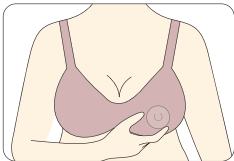

2. Bruk BH-en komfortabelt etter at har justert plasseringen.

Rengjøring og oppbevaring

1. Skyll med vann og tørk grundig etter daglig bruk.
2. Ettersom beskytterne er laget av rent sølv, vil langvarig

eksponering for luft, fuktighet, svette osv. føre til at overflaten på beskytterne blir litt svart og gul. Dette er normalt.

3. Hvis brystvortebeskyttere i sølv viser tegn til misfarging, lag en pasta av natron og litt vann, gni den forsiktig på beskytterne, skyll grundig og tørk godt.
4. Rengjør dem og oppbevar dem på et tørt sted hvis de ikke skal brukes på lengre tid.
5. Vær forsiktig når du bruker dem.
6. De indre veggene i beskytterne er svært tynne.
7. Kraftige støt kan føre til at produktene deformeres noe.

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss via e-post.



support@momcozy.com



b2bcs@momcozy.com



+1-855-322-1783




Man.-søn, kl. 08.00-17.00, EST

Nazwa produktu	Srebrne nakładki ochronne na sutki
Materiał produktu	Srebro próby 999
Rozmiar produktu	Trzy rozmiary do wyboru: Standardowy, XL, XXL
Odpowiedni dla	Srebrna nakładka ochronna na sutek została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o kobietach karmiących piersią odczuwających dyskomfort, taki jak suchość, pękanie lub ból brodawek sutkowych.
Srebrna nakładka ochronna na sutek	Srebrna nakładka ochronna pomaga złagodzić tarcie między ubraniem a suchymi, spękanymi lub bolesnymi sutkami.


Rozmiar produktu	Standardowy	XL	XXL
Szerokość	1,77 cala/ 45 mm	2,16 cala/ 55 mm	2,56 cala/ 65 mm
Wysokość	0,63 cala/ 16 mm	0,71 cala/ 18 mm	0,79 cala/ 20 mm
Pasujące rozmiary otoczek	Mniejsze niż 1,8 cala (45 mm)	Większe niż 1,8 cala (45 mm) i mniejsze niż 2,2 cala (56 mm)	Większe niż 2,2 cala (56 mm)

Sposób użycia

- Przed użyciem nakładki należy dokładnie umyć i osuszyć ręce.
- Wyczyścić obszar sutka i srebrne nakładki za pomocą chusteczek.

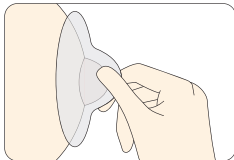

1. Delikatnie umieścić srebrną nakładkę ochronną na sutku, bezpośrednio na brodawce;

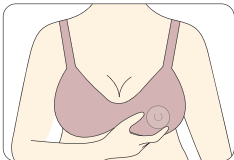

2. Po dopasowaniu jej położenia wygodnie załóż biustonosz.

Czyszczenie i przechowywanie

1. Po dniu używania spłukać wodą i dokładnie wysuszyć.
2. Nakładki są wykonane z czystego srebra, zatem długotrwała

ekspozycja na powietrze, wilgoć, pot itp. spowoduje, że powierzchnie nakładek lekko szernieją i pożółkną, co jest normalne.

3. Jeśli srebrna nakładka ochronna na sutek wykazuje oznaki przebarwienia, zrób pastę z sody oczyszczonej i odrobiny wody, delikatnie wetrzyj ją w nakładki, dokładnie wypłucz i osusz.
4. Jeśli nakładki nie są używane przez dłuższy czas, należy je wyczyścić i przechowywać w suchym miejscu.
5. Zachowaj ostrożność podczas noszenia.
6. Wewnętrzne ścianki nakładek są bardzo cienkie.
7. Silne uderzenie może spowodować nieznaczne odkształcenie produktów.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailową.



support@momcozy.com



b2bcs@momcozy.com



+1-855-322-1783




Man.-søn, kl. 08.00-17.00, EST

Nome do produto	Proteções de mamilo de prata
Material do produto	Prata fina 999
Tamanho do produto	Três tamanhos à escolha: normal, XL, XXL
Adequado para	A proteção de mamilo de prata foi concebida principalmente para minimizar o desconforto, a secura, as fissuras ou a dor nos mamilos das mulheres que amamentam.
Proteção de mamilo de prata	A proteção de prata ajuda a aliviar a fricção entre a roupa e os mamilos secos, gretados ou dolorosos.


Tamanho do produto	Normal	XL	XXL
Largura	1.77"/45 mm	2.16"/55 mm	2.56"/65 mm
Altura	0.63"/16 mm	0.71"/18 mm	0.79"/20 mm
Tamanho da aréola	Menos de 1.8"	Entre 1.8" e 2.2"	Mais de 2.2"

Modo de utilização

- Lave e seque bem as mãos antes de utilizar a proteção.
- Limpe a zona do mamilo e as proteções de prata com toalhetes.

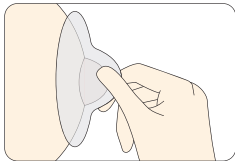

1. Coloque suavemente a proteção de mamilo de prata mesmo em cima do mamilo;

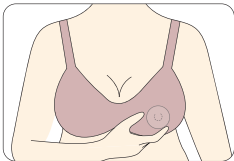

2. Ajuste a posição e use o seu sutiã confortavelmente.

Limpeza e armazenamento

1. Depois da utilização diária, enxague com água e seque bem.
2. Uma vez que as proteções são de prata pura, a exposição

prolongada ao ar, à humidade, ao suor, etc. torna as superfícies ligeiramente pretas e amarelas, o que é normal.

3. Se a proteção de mamilo de prata apresentar sinais de descoloração, faça uma pasta com bicarbonato de sódio e um pouco de água, esfregue suavemente nas proteções, enxágue bem e seque.
4. Em caso de não utilização por períodos prolongados, limpe-as e guarde-as em local seco.
5. Cuidado durante a utilização.
6. As paredes interiores das proteções são muito finas.
7. Um impacto forte pode provocar uma ligeira deformação nos produtos.

Se tiver alguma dúvida, contacte-nos por e-mail.



support@momcozy.com



b2bcs@momcozy.com



+1-855-322-1785




Seg-dom, 8h00-17h00, ETZ

Produktnamn	Bröstvårtskyddskoppar i silver
Produktmaterial	999 finsilver
Produktens storlek	Tre storlekar att välja mellan: Medelstor, XL, XXL
Lämplig för	Bröstvårtskyddskoppar i silver är främst utformade för att lindra obehag hos ammande kvinnor som upplever till exempel torrhet, sprickbildning eller smärta i bröstvårtorna.
Bröstvårtskyddskoppar i silver	Skyddskoppen i silver bidrar till att minska friktionen mellan kläder och torra, spruckna eller smärtande bröstvårtor.


Produktens storlek	Medelstor	XL	XXL
Bredd	1,77 tum/ 45 mm	2,16 tum/ 55 mm	2,56 tum/ 65 mm
Höjd	0,63 tum/ 16 mm	0,71 tum/ 18 mm	0,79 tum/ 20 mm
Motsvarande storlekar på vårtgården	Mindre än 1,8 tum	Större än 1,8 tum men mindre än 2,2 tum	Större än 2,2 tum

Användning

- Tvätta och torka händerna noga innan du använder skyddet.
- Rengör området vid bröstvårtan och silverkopporna med våtservetter.

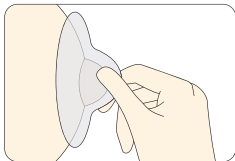

1. Placera försiktigt skyddskoppen i silver precis ovanpå bröstvårtan.

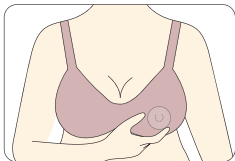

2. När du har justerat positionen ska det vara bekvämt att bära din behå.

Rengöring och förvaring

1. Efter daglig användning, skölj med vatten och torka noggrant.
2. Eftersom kopporna är tillverkade av rent silver kan långvarig

exponering för luft, fukt, svett o.s.v. leda till att kopparnas ytor svartnar eller gulnar, vilket är normalt.

3. Om bröstvårtskyddskopp i silver visar tecken på missfärgning, gör en pasta av bakpulver och lite vatten, gnugga försiktigt på kopparna, skölj noggrant och torka av.
4. Rengör och förvara dem på en torr plats när de inte används under en längre tid.
5. Var försiktig när du bär dem.
6. Kopparnas innerväggar är mycket tunna.
7. Kraftiga stötar kan orsaka lätt deformation av produkterna.

Om du har några frågor, kontakta oss via e-post.



support@momcozy.com



b2bcs@momcozy.com



+1-855-322-1786



Mån-sön, kl. 08:00–17:00, EST

Explanation of Symbols

	Manufacturer
	Unique Device Identifier
	Date of manufacture (YYYY-MM-DD or YYYY-MM)
	Batch code (YYMMWWWW)
	Medical device
	Country of manufacturer
	Temperature limit
	Humidity limitation



Atmospheric pressure limitation

UK REP

UK representative

EU REP

European Representative



CE Mark



Importer name and address



Share Info GmbH

Am Schulzentrum 12, 41564 Kaarst, Germany.

E-mail: eu-rep@share-info.com



UK Responsible Person SHAREINFOLD

Add: 3rd Floor, Office C, Townend House, Park Street,

Walsall West Midlands, WS1 1NS, United Kingdom



Shenzhen Root Innovation Technology Co., Ltd.

#2-201, Floor 2 Hasee Computer Building, No.2 Beier Rd,

Bantian Street, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129 CHINA



momcozy

注：此页无需印刷，文件每一页含有
3mm 出血位，实际印刷时请裁切！

ROOT路特				包装平面设计图纸	
图档名称	Momcozy 银乳头保护罩 14 国说明书			物料版本	V1.1.1
印刷颜色	CMYK			材质工艺	封面 150g 铜版纸, 内页 100g 铜版纸
产品经理		结构工程师		平面设计师	高歌
变更记录:					
过程版本	设计/变更日期	变更内容			
V1.1.1	2025/10/13	首次输出 14 国说明书			
V1.1.2	2025/10/15	修改内容			
V1.1.3					
V1.1.4					
V1.1.5					
特别声明 1.出血位为2mm，刀模仅供参考； 2.印刷厂不得擅自更改内容，如有印刷/工艺等问题，请及时与我司平面设计师沟通处理。 3.印刷版权归深圳路特新材料科技有限公司所有，私自复制、修改、使用文档所产生的一切责任后果皆由使用者承担。					
				单位：mm	比例：1：1

75*75 (h) mm ，公差 ±0.5mm